



Advantage Fit™ and Advantage™

Трансвагинальные средне уретральные
СЛИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Advantage Fit™ and Advantage™

Трансвагинальные средне уретральные слинговые системы

Компания Boston Scientific предлагает полный портфель решений для лечения стрессового недержания мочи, что дает вам контроль и уверенность в лечении пациентов с помощью предпочитаемого вами хирургического подхода.

Слинговые системы Advantage Fit и Advantage Mid-urethral Sling Systems предлагаются в оригинальной прозрачной сетке, а также в синей сетке Advantage™, обеспечивающей улучшенную видимость и используемой в более чем одном миллионе изделий Advantage*.

Гладкая, субуретральная часть с выступами, предназначенная для сохранения ее целостности во время натяжения и потенциального уменьшения раздражения стенки уретры

Загнутые края снаружи субуретральной части предназначены для предотвращения миграции сетки

Улучшенная видимость.

Основано на доказательствах.

- Те же свойства сетки, что и у нашей запатентованной сетки Advantage, которые на сегодняшний день подтверждены более чем в 100 публикациях.
- Легко различимый, оптически синий цвет разработан для улучшения видимости для более точного интраоперационного натяжения стропы и может облегчить определение местоположения после операции**.

Доверенная полипропиленовая сетка¹

- - Толщина сетки: 0,66 мм
- - Размер пор: 1182 мкм
- - Размер волокна (диаметр): 0,15 мм
- - Вес: 100 г/м²

* Данные в архиве Boston Scientific.

** Основано на отзывах врачей.

Ручка устройства доставки

Эргономичная рукоятка разработана таким образом, чтобы помещаться в руке врача и обеспечивать возможность амбидекстрического использования.

Нескользящая рукоятка

Предназначена для эргономичного захвата и предотвращения соскальзывания рук во время интраоперационных манипуляций.

Толкатель на Advantage Fit

Разработан с толкателем для эргономичного размещения пальцев, что обеспечивает пользователю большую стабильность иглы и контроль во время родов.


Радиус и диаметр иглы

Более тонкая игла и более плотный изгиб Advantage Fit предназначены для уменьшения силы введения и размещения сетки ближе к лобковой кости² и дальше от критических структур.

- Диаметр иглы Advantage: 5 мм
- Диаметр иглы Advantage Fit: 2,7 мм (на 46% тоньше)

Вкладка центрирования


Позволяет правильно расположить центр сетки под уретрой. Это также позволяет врачу противодействовать натяжению ремня, сохраняя при этом целостность сетки.

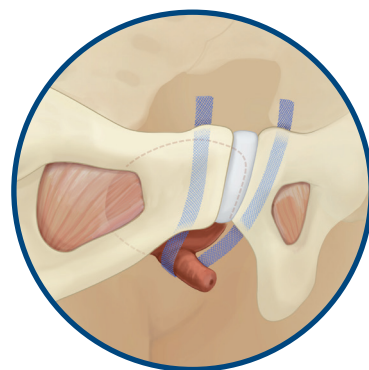

Трансвагинальный подход

Синий расширитель

Для улучшения визуализации во время цистоскопии.

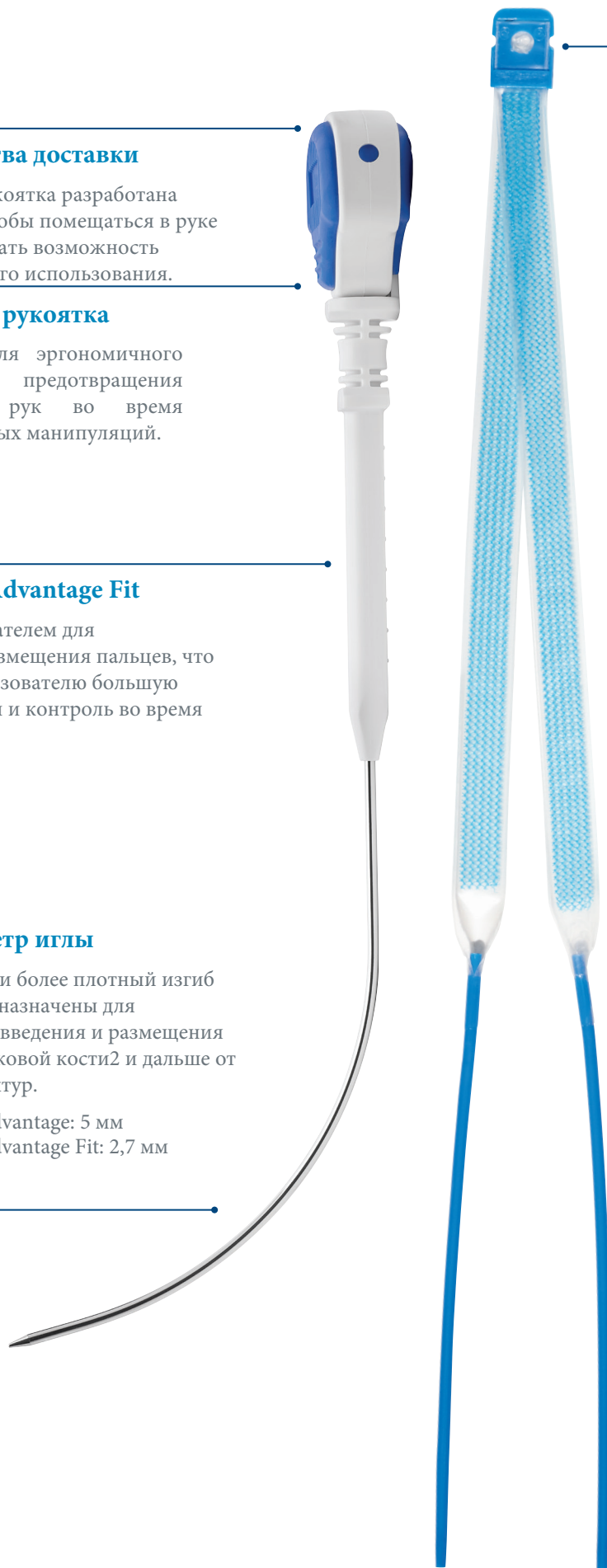

Информация для заказа

Код продукта	Описание	Кол-во
MO068502120	Advantage Fit™ Blue System	1 устройство доставки и 1 узел сетки
MO068502110	Advantage Fit™ System	1 устройство доставки и 1 узел сетки
MO068502050	Advantage™ Blue System	1 устройство доставки и 1 узел сетки
MO068502000	Advantage™ System	1 устройство доставки и 1 узел сетки

1. Moali, Pamela, et al. Свойства растяжения пяти широко используемых среднеуретральных строп относительно TVT™ Int Urogynecol J (2008) 19:655-663 DOI 10.1007/s00192-007-0499-1.
2. По сравнению с трансвагинальным средним уретральным слингом Advantage™.

Осторожно: Для женских среднеуретральных слингов: Федеральный закон (США) ограничивает продажу данного устройства врачом, обученным использованию хирургических сеток для лечения стрессового недержания мочи, или по его распоряжению. В связи с установкой субуретрального слинга сообщалось о следующих нежелательных явлениях, любое из которых может иметь место, но не ограничивается ими: Как и при использовании всех имплантатов, может возникнуть местное раздражение в месте раны и/или реакция инородного тела, Реакция инородного тела может быть острой или хронической, Боль (тазовая, вагинальная, паховая/бедренная, надлобковая, диспареуния) (острая или хроническая), диспареуния, Реакция тканей на сетчатый имплантат может включать: эрозию в органы (уретру, мочевого пузыря или другие окружающие ткани); контакт сетки с мочой через эрозию/экспозицию/экстракцию может привести к образованию камней, рубцов/шрамов, некрозу, образованию свищей (острых или хронических), воспалению (острому или хроническому), контрактуры сетки, контрактуры тканей, Укорочение или стеноз влагалища, что может привести к диспареунии и/или сексуальной дисфункции, Боль при половом акте, которая может не пройти, Открытая сетка может причинять боль или дискомфорт партнеру пациентки во время полового акта, Сексуальная дисфункция, включая неспособность к половому акту. Как и все инородные тела, сетка может усилить существующую инфекцию. Сообщалось об аллергических реакциях. Известные риски хирургических процедур для лечения недержания мочи включают: боль, постоянная боль (тазовая, вагинальная, паховая/бедренная, надлобковая, диспареуния), сильная, хроническая боль, апареуния, слабость в ногах, инфекция, нестабильность детрузора De novo, полный провал процедуры/неспособность решить проблему стрессового недержания мочи у пациента, дисфункция мочеиспускания (недержание мочи, временная или постоянная обструкция нижних мочевых путей, затрудненное мочеиспускание, боль при мочеиспускании, гиперактивный мочевой пузырь и задержка мочи), Синяки, кровотечение (вагинальное, образование гематом), Абсцесс, выделения из влагалища, дегисценция вагинального разреза, отек и эритема в месте раны, Перфорация или разрыв сосудов, нервов, мочевого пузыря, уретры или кишечника может произойти во время установки. Для системы Solux SIS были зарегистрированы следующие дополнительные нежелательные явления: дизурия, гематурия. Возникновение этих явлений может потребовать хирургического вмешательства и возможного удаления всей сетки. В некоторых случаях эти явления могут сохраняться как постоянное состояние после хирургического вмешательства или другого лечения. Удаление сетки или коррекция осложнений, связанных с сеткой, может потребовать нескольких операций. Полное удаление сетки может быть невозможным, а дополнительные операции не всегда полностью устраняют осложнения.

ВНИМАНИЕ: Закон ограничивает продажу этих устройств врачом или по его предписанию. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции по применению содержатся в маркировке изделия, прилагаемой к каждому устройству. Информация для использования только в странах с соответствующей регистрацией органов здравоохранения. Материал не предназначен для использования во Франции.

Продукты, показанные только в целях ИНФОРМАЦИИ, могут быть не одобрены или не продаваться в некоторых странах. Пожалуйста, уточните наличие на других рынках у местного торгового представителя или в службе поддержки клиентов. Все торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Все изображения принадлежат компании Boston Scientific.

MMG

Medical Marketing Group

Адрес: г. Алматы ул. Луганского 54 В
Телефон +7 (727) 313 12 19

E-mail info@medicalmarketinggrp.com

Boston
Scientific

Advancing science for life™

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
www.bostonscientific.com

© 2021 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.

WH-465202-AD JULY2021