



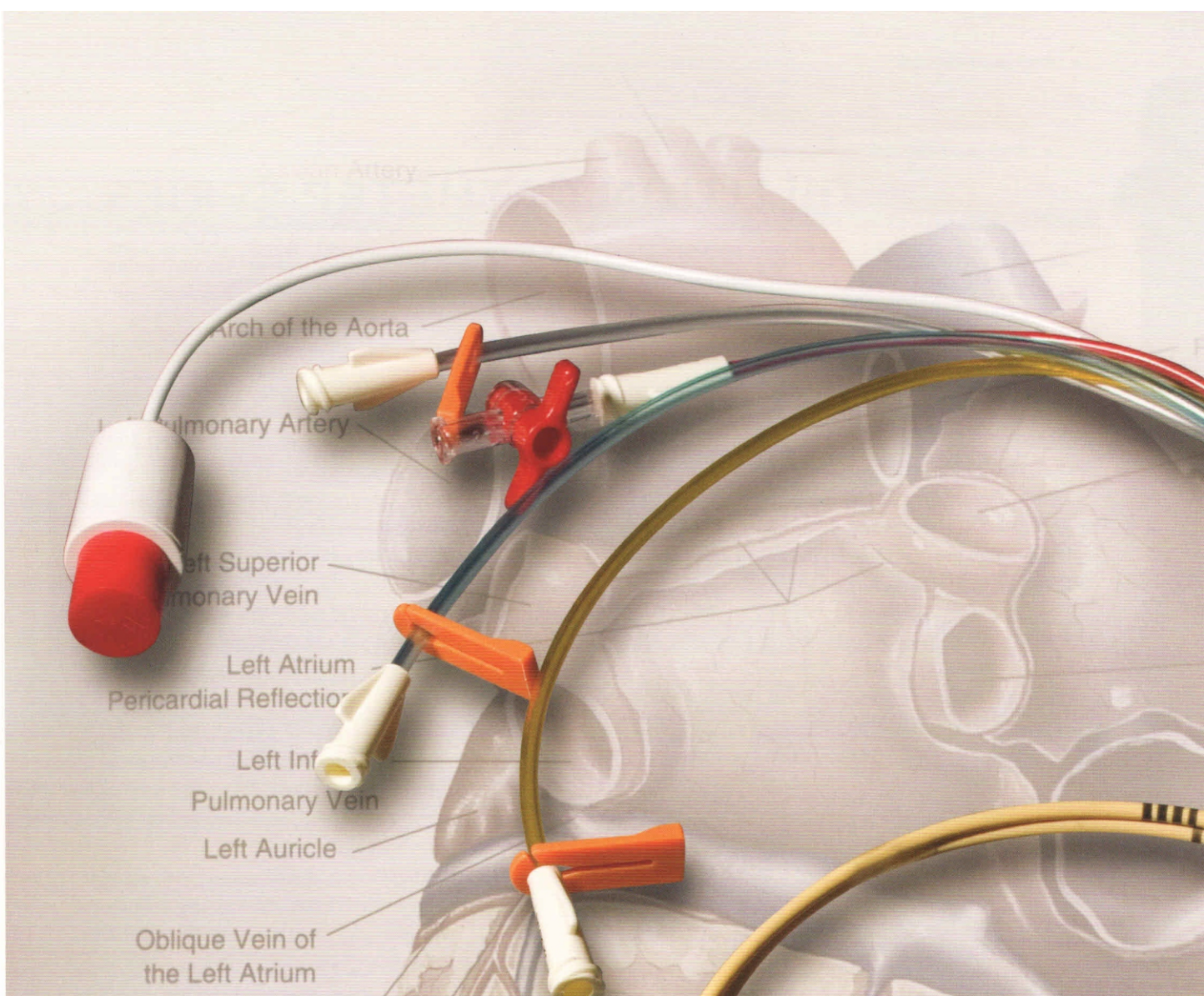

ARROW® RÜSCH

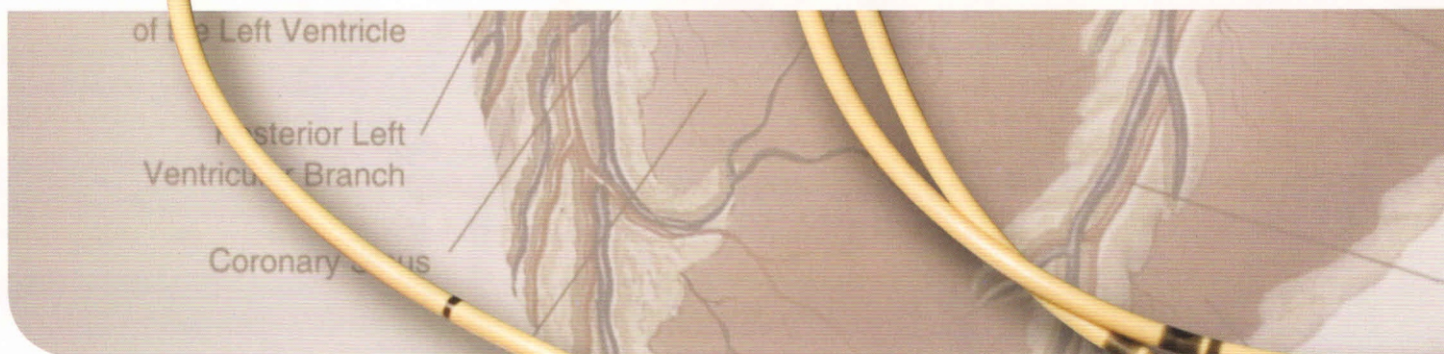

Teleflex
MEDICAL

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ (ЦВК)

Комплектации центральных венозных катетеров ARROW	4
Наборы с однопросветными ЦВК	6
Наборы с двухпросветными ЦВК	7
Наборы с трехпросветными ЦВК	8
Наборы с четырехпросветными ЦВК	9

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПЕДИАТРИИ

Педиатрические венозные катетеры	10
--	----

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

ЦБК для гемодиализа	12
Постоянные катетеры для хронического гемодиализа CANNON II Plus ...	13

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ РЕАНИМАЦИИ

Артериальные катетеры	14
EZ-IO Внутрикостная система	15
Дилатационный трахеостомический набор	16
Кониотомический набор TracheoQuick	17
AccuVein AV400	18
Силкоспрей. Универсальный силиконовый аэрозоль	20
Диаметр катетеров	21

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ ARROW


Свойства центральных венозных катетеров (ЦВК), комплектация наборов, компоненты, входящие в их состав, создаются и модифицируются ARROW для удобства их использования врачами, с целью минимизации возможных осложнений, связанных с катетеризацией.

ПРОФИЛАКТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ


Кончик BlueFlexTip: для уменьшения вероятности механических и тромботических осложнений связанных с катетеризацией, все катетеры ARROW изготавливаются из термопластичного рентгеноконтрастного полиуретана, дистальная часть катетера защищена мягким атравматичным кончиком BlueFlexTip.



Шприц Раулерсона: модификация методики установки центрального катетера по Сельдингеру с помощью шприца ARROW Raulerson® (позволяющего вводить проводник в просвет сосуда сквозь поршень), снижает количество манипуляций при установке катетера, устраняет вероятность дислокации иглы, эффективно предупреждает воздушную эмболию, сводит к минимуму кровопотерю и контакт врача с кровью пациента. Перечисленные преимущества делают катетеризацию центральной вены значительно более безопасной и технологичной.

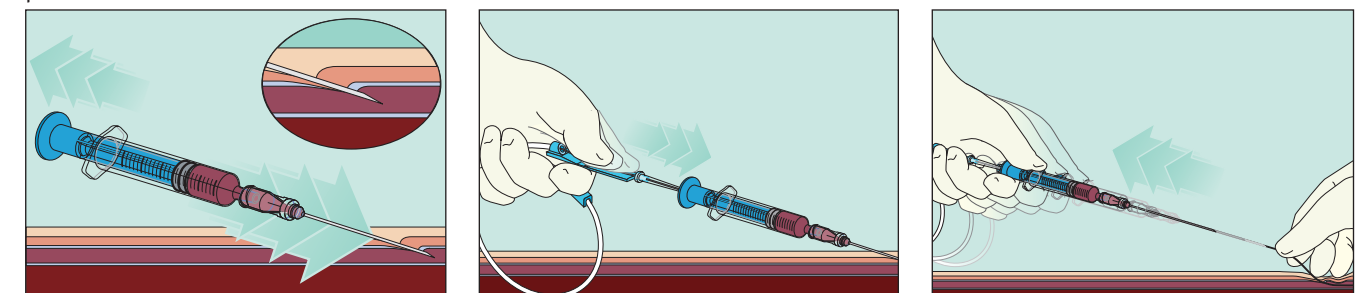

Игла контроля давления (transduction probe): Для верификации принадлежности пунктированного сосуда к венозному или артериальному руслу можно воспользоваться иглой контроля давления (в наборах с шприцем Raulerson) с последующим подсоединением к монитору инвазивного давления или оценить пульсацию крови через иглу (без подключения к монитору)

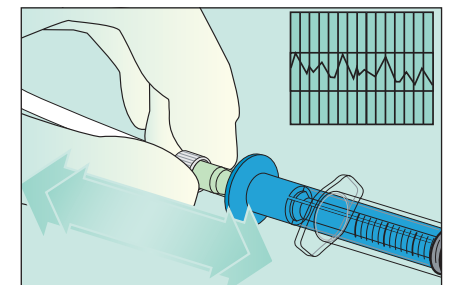

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ КАТЕТЕРИЗАЦИИ

Компания ARROW первой в мире разработала и внедрила в клиническую практику ЦВК с антимикробной защитой, не имеющей аналогов по своей эффективности и в настоящее время.

- Обработанные антисептическим составом, содержащим хлоргексидин и сульфадiazин серебра, центральные венозные катетеры ARROW позволили достоверно уменьшить число случаев катетер-ассоциированной инфекции более чем в четыре раза.
- Активность антимикробного покрытия из хлоргексидина и сульфадiazина серебра сохраняется в течение 520 часов (три недели), что существенно увеличивает безопасный срок службы катетера и избавляет от необходимости его плановой переустановки в течение месяца.
- Эффективное предупреждение септических осложнений, связанных с установкой ЦВК позволяет улучшить прогноз пациентов в критических состояниях, снизить сроки госпитализации, сэкономить существенные суммы на дополнительных расходных материалах и лекарственных препаратах.
- Катетеры ARROW с антимикробной обработкой хлоргексидином и сульфадiazином серебра выпускаются в двух вариантах:
 - Наборы с ЦВК **ARROW g^{ard} Blue** с антимикробным покрытием составом хлоргексидина и сульфадiazина серебра внешней стороны катетера.
 - Наборы с ЦВК **ARROW g^{ard} Blue PLUS**, импрегнированные антимикробным составом хлоргексидина и сульфадiazина серебра, имеют защиту, как с внешней стороны катетера, так и внутри его просветов.



Катетер с антимикробным покрытием ARROW g^{ard} Blue



Катетер с антимикробной импрегнацией ARROW g^{ard} Blue PLUS

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
ВЕНОЗНЫЕ ПАТЕТЕРЫ
Teleflex | **ARROW**
MEDICAL

КОМПЛЕКТАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕНОЗНЫХ КАТЕТЕРОВ ARROW


Наборы с ЦВК:

CV-серия представляет собой наиболее распространенный и привычный для большинства врачей набор, содержащий в своем составе:

- Центральный венозный катетер (ЦВК)
- Пункционную иглу
- Тканевый расширитель
- Шприц
- Проводник
- Мягкий и жесткий зажимы катетера




Сечения центральных венозных катетеров серии CV

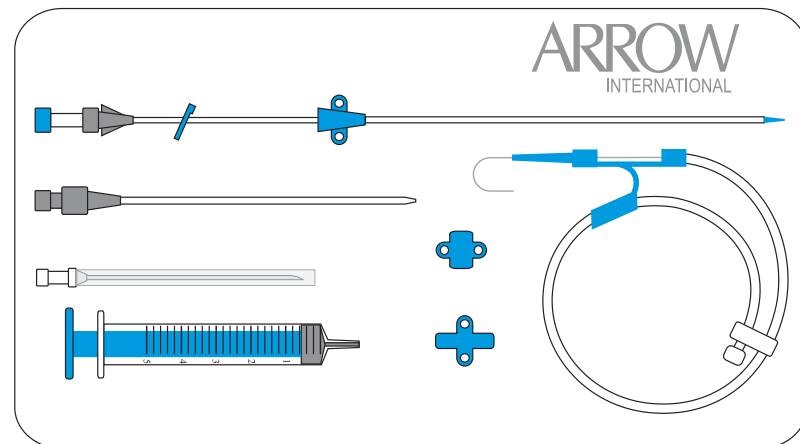


CS-серия наборов с ЦВК ARROW содержит в своем составе:

1. Центральный венозный катетер (ЦВК)
2. Пункционную иглу
3. Тканевый расширитель
4. Шприц
5. Проводник
6. Мягкий и жесткий зажимы катетера
7. Канюлю на игле (включение в состав набора канюли на игле обеспечивает оператору более безопасную альтернативу пункционной игле при установке катетера)

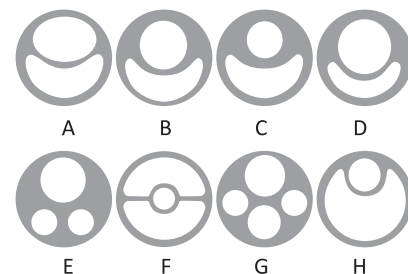

Сечения центральных венозных катетеров серии CS

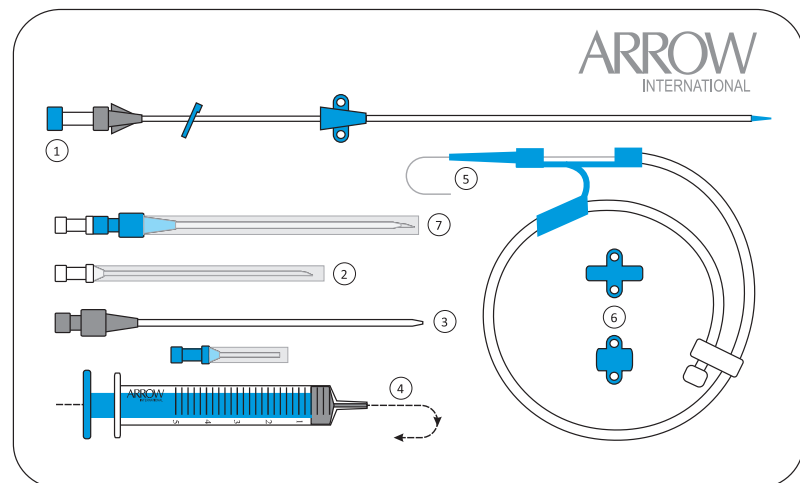


CV- и CS- серии наборов с ЦВК могут комплектоваться, как обычным шприцем, так и шприцем Раулера.

Комплекты с ЦВК:

Комплект MBSK (Maximum Barrier Select Kit)

Комплектация MBSK специально создана для обеспечения максимально возможной защиты врача от случайного инфицирования при процедуре установки катетера и для защиты пациента от механических и инфекционных осложнений катетеризации.

- Защита врача от заражения через кровь пациента обеспечивается наличием в составе набора MBSK: халата, маски с экраном для глаз, шприца Раулера, самовыдвигающегося безопасного скальпеля.
- Устройство для утилизации игл Sharps-Away с запорным механизмом и специальные блокирующие колпачки, предустановленные на иглы, снижают вероятность случайного укола использованной иглой.
- Входящая в комплект стерильная простыня, закрывающая всю поверхность тела пациента, имеет отверстие с адгезивным слоем для ограничения места пункции. Наборы MBSK комплектуются исключительно катетерами ARROW g*ard Blue Plus с антимикробной импрегнацией, что обеспечивает высокий уровень защиты от катетер-ассоциированных инфекций.

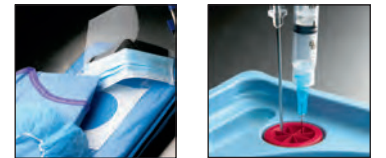

Состав комплекта MBSK:

- ЦВК ARROW g*ard Blue PLUS
- Мягкий и жесткий зажимы катетера
- Проводник
- Тканевый расширитель
- Инъекционные иглы с защитными колпачками для защиты от укола после использования
- Шприц (для местной анестезии)
- Пункционная игла Сельдингера
- Шприц Raulerson 5 мл
- Аппликатор для нанесения дез. раствора
- Платформа для утилизации игл Sharps Away
- Скальпель № 11
- Иглодержатель стальной
- Шовный материал с изогнутой иглой
- Марлевые салфетки
- Маска с защитой глаз
- Хирургический халат XXL
- Стерильная простыня 175x280 см с отверстием для ограничения места пункции
- Вкладыш – протокол катетеризации
- Вкладыш (предупреждение о проведении стерильной процедуры)



Комплект EASK (European ARROW Select Kit)

Комплектация EASK разработана для удобства работы врача, содержит все необходимые для установки катетера компоненты. Возможен индивидуальный подбор компонентов комплекта под нужды конкретного медицинского учреждения (отделения).

Состав комплекта EASK:

- Центральный венозный катетер
- Проводник
- Тканевый расширитель
- Инъекционная игла
- Шприц (для местной анестезии)
- Пункционная игла Сельдингера
- Шприц Raulerson 5 мл
- Стерильная пеленка с отверстием для ограничения места пункции
- Скальпель № 11
- Марлевые салфетки
- Шовный материал с изогнутой иглой
- Пластиковый контейнер для анестетика/физ.р-ра
- Иглодержатель стальной
- Ножницы стальные
- Пинцет Adson
- Пинцет хирургический
- Хирургический халат XXL




ОДНОПРОСВЕТНЫЕ




№ По каталогу	Диаметр, Ga	Длина, см	Шприц	Игла, ga x см	Проводник, дюйм x см
CV-04301	16	20		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-04306	16	16		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-04701	14	20		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-04706	14	16		18 x 6,35	0,032" x 45
CS-04701	14	20		18 x 6,35	0,032" x 60
ES-04301	16	20		18 x 6,35	0,032" x 60
ES-04306	16	16		18 x 6,35	0,032" x 45
ES-04701	14	20		18 x 6,35	0,032" x 60
ES-04706	14	16		18 x 6,35	0,032" x 45
ES-04730	14	30		18 x 6,35	0,032" x 60

Однопросветные ЦВК **ARROW g⁺ard Blue**
с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag⁺

CV-24301-E	16	20		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-24701-E	14	20		18 x 6,35	0,032" x 60

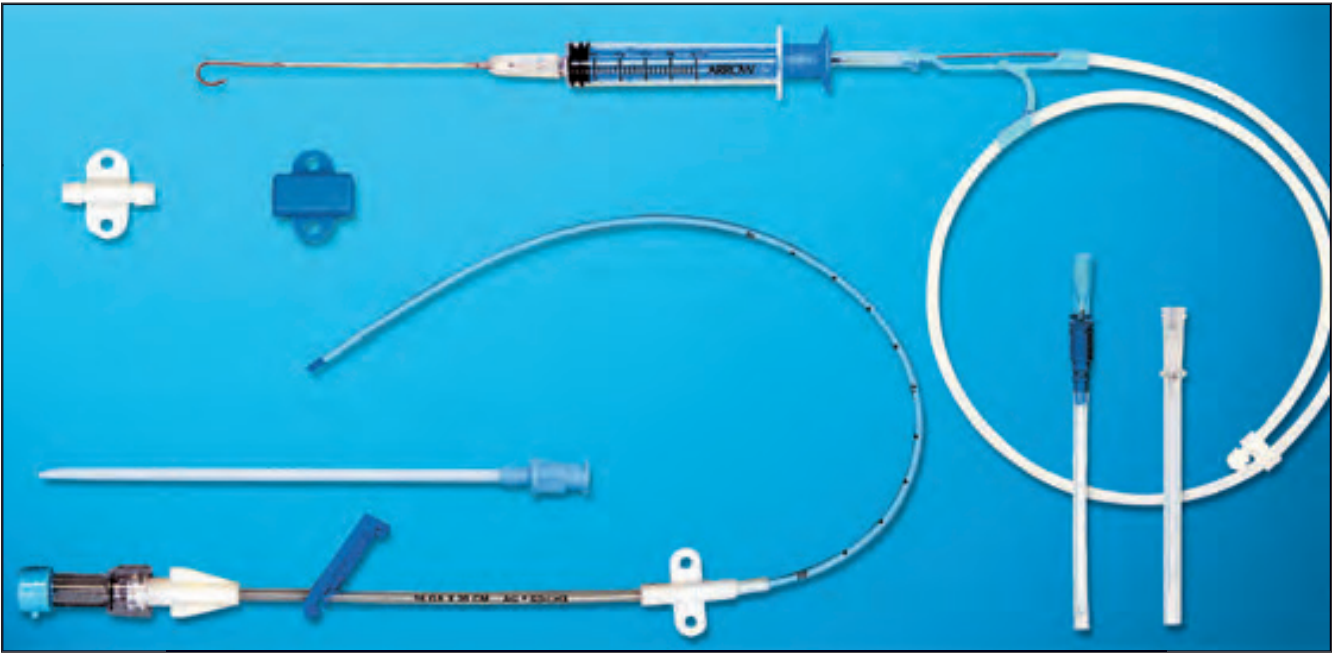

ДУХПРОСВЕТНЫЕ

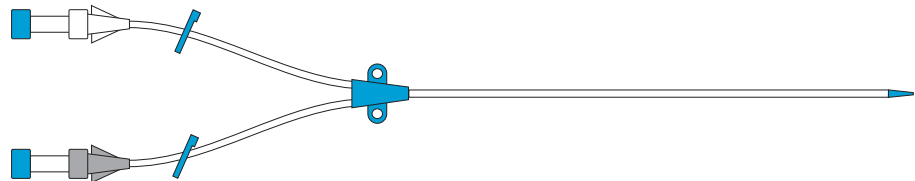


№ По каталогу	Диаметр, Fr	Длина, см	Сечение, Просветы, Ga	Шприц	Игла, Ga x см	Проводник, дюйм x см
CV-12702	7	16	D 14/18		18 x 6,35	0,025" x 45
CV-14702	7	30	C 16/16		18 x 6,35	0,032" x 68
CV-15802	8	20	B 14/14		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-16702	7	20	C 16/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-16702-E	7	20	C 16/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-17702	7	20	D 18/14		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-17702-E	7	20	D 18/14		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-12702-E	7	16	D 14/18		18 x 6,35	0,025" x 45
CS-12802	8	16	A 14/14		18 x 6,35	0,032" x 45

Двухпросветные ЦВК **ARROW g⁺ard Blue**
с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag⁺


CV-22702-E	7	16	D 14/18		18 x 6,35	0,025" x 45
CV-25802-E	8	20	C 14/14		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-26702-E	7	20	C 16/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-27702-E	7	20	D 18/14		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-22702-E	7	16	D 14/18		18 x 6,35	0,025" x 60
CS-25802-E	8	20	A 14/14		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-26702-E	7	20	B 16/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-27702-E	7	20	D 14/18		18 x 6,35	0,032" x 60

Двухпросветные ЦВК **ARROW g⁺ard Blue PLUS**
с антимикробной импрегнацией хлоргексидином/сульфадиазином Ag⁺


CV-46702-E	7	20	16/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-47702-E	7	20	14/18		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-45802-E	8	20	14/14		18 x 6,35	0,032" x 60

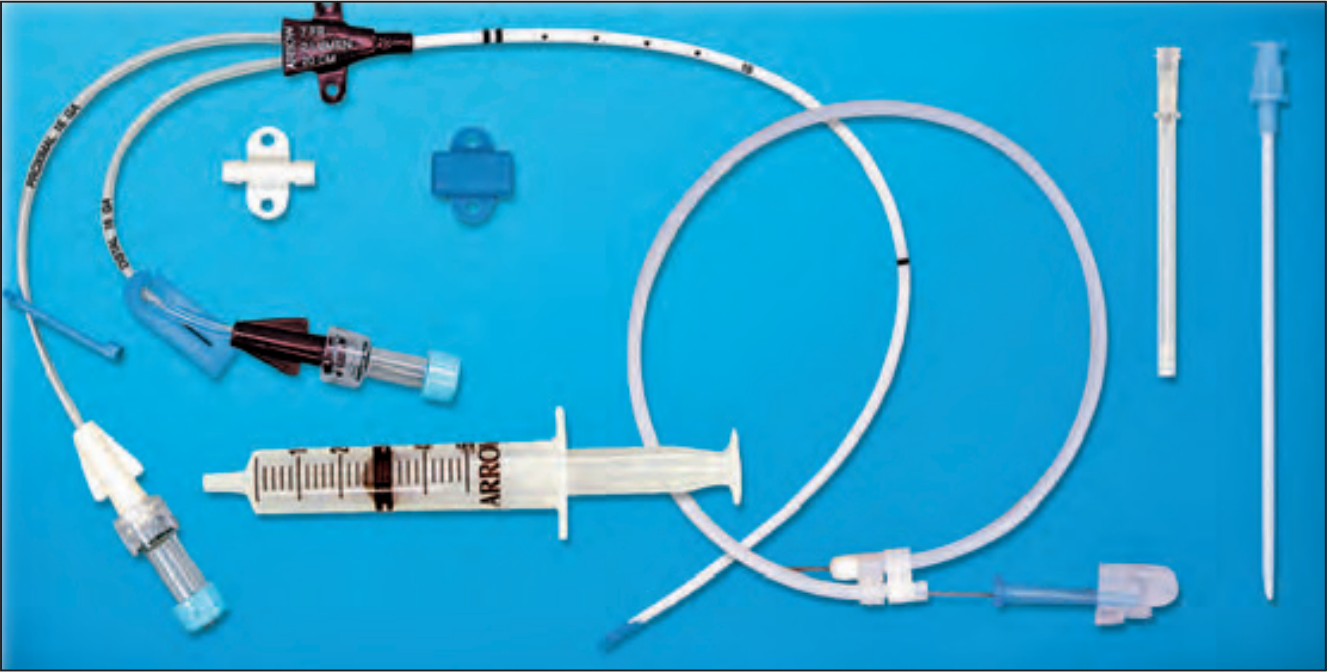

ТРЕХПРОСВЕТНЫЕ

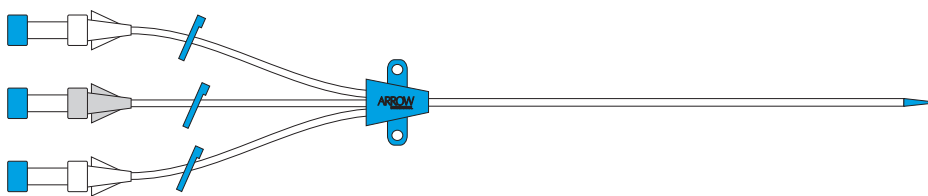

ЧЕТЫРЕХПРОСВЕТНЫЕ

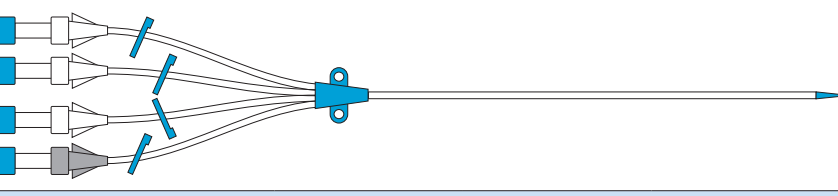

№ По каталогу	Диаметр, Fr	Длина, см	Сечение, Просветы, Ga	Шприц	Игла, Ga x см	Проводник, дюйм x см
CV-12703	7	16	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-12703-E	7	16	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-12853	8,5	16	E 14/16/16		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-14703-E	7	30	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 68
CV-15703	7	20	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-15703-E	7	20	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-12703	7	16	E 16/18/18		18 x 6,35	0,032" x 45
CS-12853	8,5	16	E 14/16/16		18 x 6,35	0,032" x 45
CS-15703	7	20	E 16/18/18		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-15703-E	7	20	E 16/18/18		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-15853	8,5	20	E 14/16/16		18 x 6,35	0,032" x 60



№ По каталогу	Диаметр, Fr	Длина, см	Сечение, Просветы, Ga	Шприц	Игла, Ga x см	Проводник, дюйм x см
CV-12854	8,5	16	F 18/14/18/16		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-15854	8,5	20	F 18/14/18/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-14854-E	8,5	30	G 14/18/16/18		18 x 6,35	0,032" x 68
CS-15854-E	8,5	20	G 14/18/16/18		18 x 6,35	0,032" x 60

Трехпросветные ЦВК ARROW g ⁺ ard Blue [®] с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag ⁺						
CV-22703	7	16	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-22703-E	7	16	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-24703-E	7	30	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 68
CV-25703-E	7	20	E 18/18/16		18 x 6,35	0,032" x 60

Четырехпросветные ЦВК ARROW g ⁺ ard Blue [®] с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag ⁺						
CV-25854	8,5	20	F 18/14/18/16		18 x 6,35	0,032" x 60
CS-25854-E	8,5	20	G 14/18/16/18		18 x 6,35	0,032" x 60


Трехпросветные ЦВК ARROW g ⁺ ard Blue PLUS с антимикробной импрегнацией хлоргексидином/сульфадиазином Ag ⁺						
CV-42703	7	16	16/18/18		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-42703-E	7	16	16/18/18		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-45703	7	20	16/18/18		18 x 6,35	0,032" x 60
CV-45703-E	7	20	16/18/18		18 x 6,35	0,032" x 60

Четырехпросветные ЦВК ARROW g ⁺ ard Blue PLUS с антимикробной импрегнацией хлоргексидином/сульфадиазином Ag ⁺						
CV-42854	8,5	16	16/18/14/18		18 x 6,35	0,032" x 45
CV-45854	8,5	20	16/18/14/18		18 x 6,35	0,032" x 60

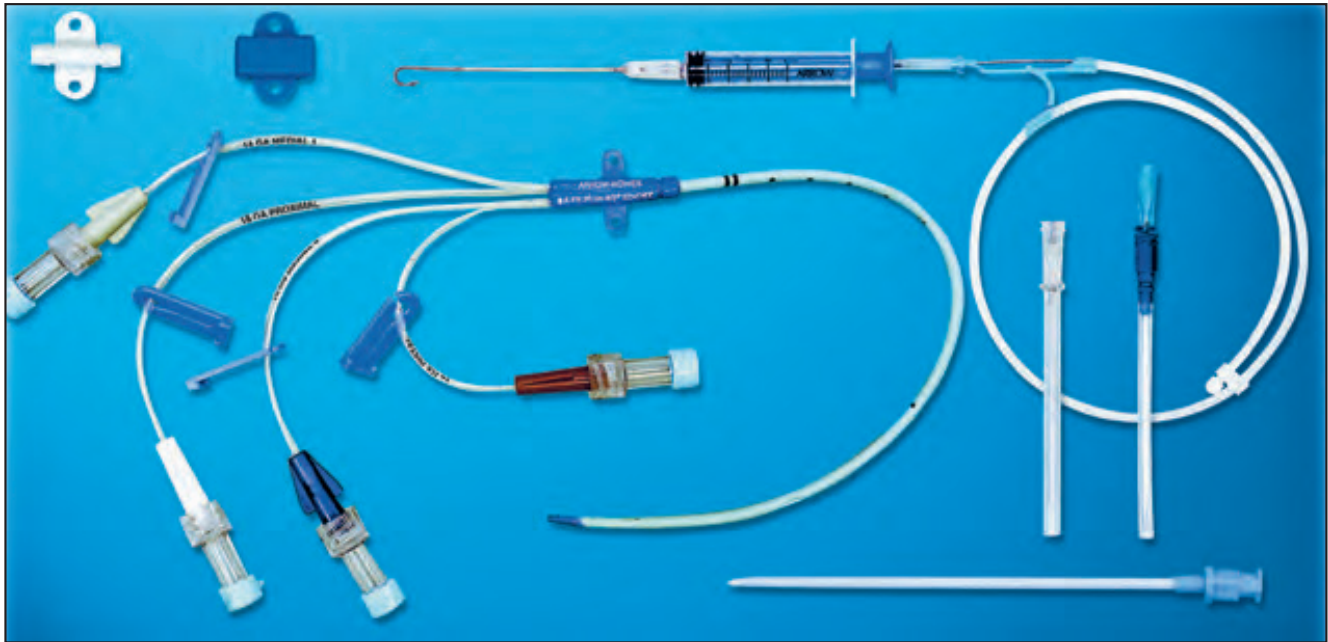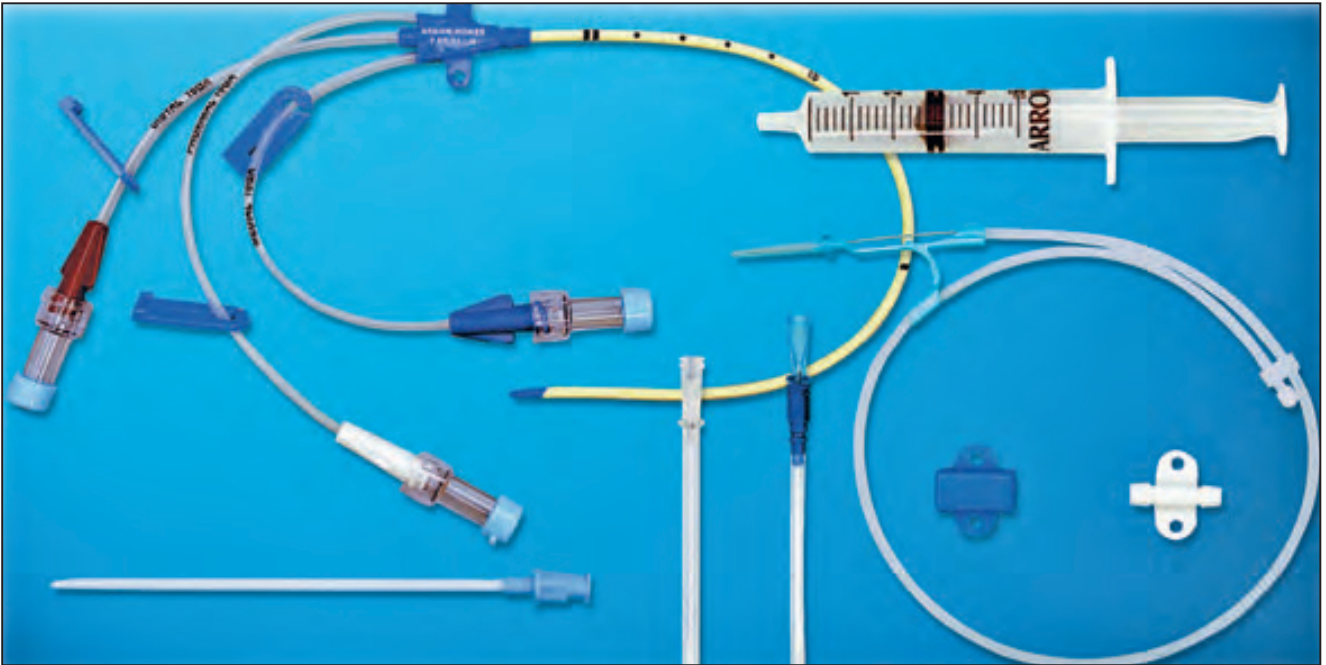

ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ ВЕНОЗНЫЕ КАТЕТЕРЫ

№ По каталогу	Диаметр, Fr	Сечение просветы, Ga	Длина, см	Проводни, дюйм x см	Игла, Ga x см	Шприц, мл
Однопросветные центральные венозные катетеры						
ES-04650		24	9	0,018" x 35	21 x 3,81	3
ES-04660		24	12	0,018" x 35	21 x 3,81	3
ES-04522		22	10	0,021" x 35	21 x 3,81	5
ES-04150		20	12	0,025" x 35	20 x 5,08	5
ES-04218		18	20	0,025" x 45	18 x 6,35	5
Двухпросветные центральные венозные катетеры						
CS-12402	4	22/22	5	0,018" x 45	21 x 3,81	5
CS-14402	4	22/22	13	0,018" x 45	21 x 3,81	5
CS-14502	5	18/20	13	0,021" x 45	20 x 3,81	5
CS-15402-E	4	22/22	8	0,018" x 45	21 x 3,81	5
CS-16402	4	22/22	30	0,018" x 45	21 x 3,81	5
ES-14402	4	22/22	13	0,018" x 45	22 x 2,67	5
Двухпросветные ЦВК ARROW g ⁺ ard Blue [®] с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag ⁺						
CS-24402	4	22/22	13	0,018" x 45	21 x 3,81	5
CS-25502	5	18/20	8	0,021" x 45	20 x 3,81	5
Трехпросветные центральные венозные катетеры						
CS-15553-E	5,5	22/22/20	8	0,018" x 45	21 x 3,81	5
CS-16553-E	5,5	22/22/20	13	0,018" x 45	21 x 3,81	5
CV-15553	5,5	22/22/20	8	0,018" x 45	21 x 3,81	5
CS-14553	5,5	22/22/20	30	0,018" x 68	21 x 3,81	5
CS-14403	4	23/23/20	13	0,018" x 45	24 x 3,81	5
CS-15403	4	23/23/20	8	0,018" x 45	21 x 3,81	5
Катетеры для гемодиализа						
CD-10802	8	14/14	10	0,025" x 45	20 x 3,81	5
CD-13902	9	14/15	13	0,025" x 60	20 x 3,81	5

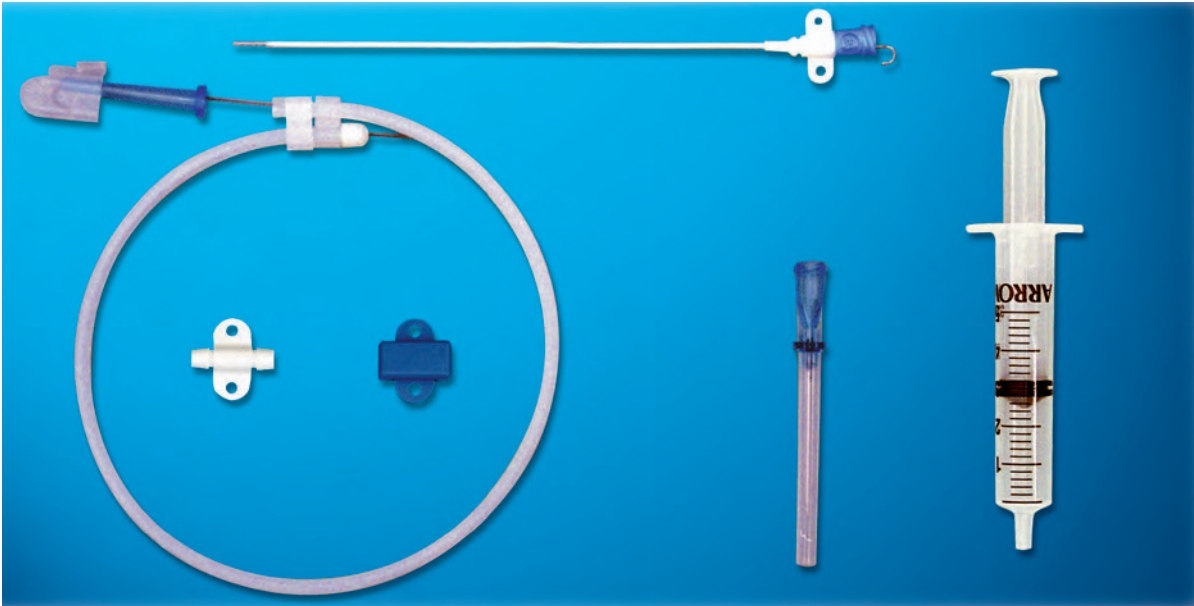

ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА
Teleflex MEDICAL | ARROW

ЦВК ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА



Наборы с катетерами для диализа ARROW имеют различную комплектацию и ряд особенностей.

Простейшие наборы серии CV отличаются минимальной стоимостью и содержат необходимый минимум принадлежностей для введения катетера по методу Сельдингера.


В наборах серии CS имеется пластиковый катетер на игле для безопасного введения проводника, в ряде наборов – шприц Arrow® Raulerson.

В некоторых наборах катетер имеет более удобные для пациента изогнутые удлинительные линии, обращенные разъемными концами, для установки в яремную вену. Эти катетеры имеют маркировку UF.

Особенного внимания заслуживают катетеры с антимикробным покрытием ARROW g*ard Blue®. Их можно рекомендовать для применения, в том числе длительного, у пациентов с высоким риском развития инфекции. Катетеры с антимикробным покрытием при соблюдении стандартных процедур по уходу реже становятся причиной инфекции и не требуют частой замены.

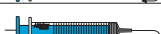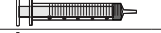№ По каталогу	Диаметр, Fr	Длина, см	Сечение, Просветы, Ga	Линии	Шприц	Игла, Ga x см	Проводник, дюйм x см
Двухпросветные							
CS-12122-E	12	16	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-12122-F	12	16	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-15122-E	12	20	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CS-15122-F	12	20	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CV-12122-F	12	16	C 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CV-12122-UF	12	16	C 12/12	П		18 x 6,35	0,035" x 68
CV-12142-UF	14	15	C 10/10	П		18 x 6,35	0,035" x 60
CV-13122-UF	12	13	C 12/12	П		18 x 6,35	0,035" x 60
CV-15122-F	12	20	B 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CV-15122-UF	12	20	B 12/12	П		18 x 6,35	0,035" x 60
CV-15142-UF	14	20	C 10/10	П		18 x 6,35	0,035" x 68
CD-10802	8	11	D 14/14	Y		20 x 3,81	0,025" x 45
CD-13902	9	13	D 14/14	Y		20 x 3,81	0,025" x 60
Трехпросветные							
CS-12123-E	12	16	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-12123-F	12	16	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-15123-E	12	20	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CS-15123-F	12	20	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CS-16123-F	12	25	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68



Двухпросветные ЦВК ARROW g*ard Blue® с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag+							
CS-22122-F	12	16	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-25122-F	12	20	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CU-22122-F	12	16	A 12/12	П		18 x 6,35	0,035" x 60
CU-23122-F	12	13	A 12/12	П		18 x 6,35	0,035" x 60
CU-25122-F	12	20	A 12/12	П		18 x 6,35	0,035" x 60
Трехпросветные ЦВК ARROW g*ard Blue® с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag+							
CS-22123-F	12	16	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-25123-E	12	20	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CS-25123-F	12	20	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68

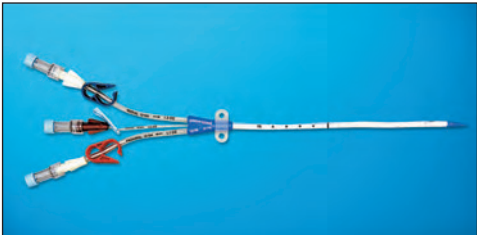

ПОСТОЯННЫЙ КАТЕТЕР РЕТРОГРАДНОГО ТУННЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОДИАЛИЗА CANNON II PLUS

Технология ретроградного туннелирования, реализованная в катетерах для хронического гемодиализа ARROW – CANNON II Plus, обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной антеградной методикой установки:

- Ретроградное туннелирование позволяет правильно установить кончик катетера до создания подкожного туннеля.
- Техника установки не требует надвигать кончики через подкожный канал перед введением в вену, что снижает вероятность инфицирования.
- Расщепленный V-образный кончик катетера минимизирует риск окклюзии и снижает рециркуляцию диализированной крови менее 5%.
- Сменный блок портов позволяет сохранить сосудистый доступ при повреждении внешней части катетера и продлить время его функционирования.

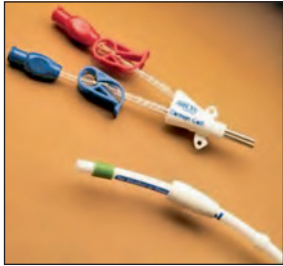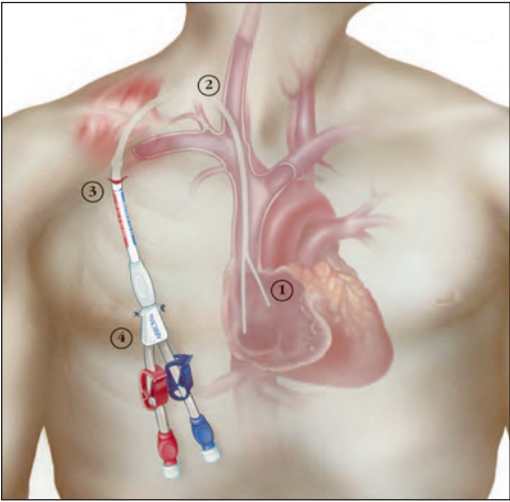

Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расщепленным окончанием 15 Fr. 10/10 Ga, пункционная игла 18 Ga x 6,35 см, проводник, скальпель, тканевые расширители: 12 Fr и 14 Fr, разрывной интродьюсер 16 Fr, расширитель туннельного хода, металлический проводник катетера по туннелю, зажим катетера, подсоединяемый сменный блок с портами, инъекционные колпачки, колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов, фиксирующая прозрачная наклейка Tegaderm® 10,0 см x 12,0 см.

№ По каталогу	Диаметр, Fr	Длина, см	Расширитель, Ga	Линии	Интродьюсер, Fr	Игла, Ga x см	Проводник, дюйм x см
CS-15242-VSP	15	24	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100
CS-15282-VSP	15	28	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100
CS-15322-VSP	15	32	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100
CS-15362-VSP	15	36	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100
CS-15552-VSP	15	55	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100

Компания ARROW рекомендует устанавливать катетеры CANNON согласно приведенной ниже таблице:

Каталожный №	Длина катетера	Место установки
CS -15242-VSP	24 см	Правая внутренняя яремная вена
CS -15282-VSP	28 см	Правая внутренняя яремная вена
CS -15322-VSP	32 см	Левая внутренняя яремная вена
CS -15362-VSP	36 см	Левая внутренняя яремная вена, бедренная вена
CS -15552-VSP	55 см	Бедренная вена

При повреждении, в результате длительного использования, элементов съемного блока с портами, он может быть заменен на аналогичный без удаления катетера:

Каталожный № катетера	Каталожный № набора для замены портов катетера
CS -15242-VSP	CAR-02400
CS -15282-VSP	CAR-02800
CS -15322-VSP	CAR-03200
CS -15362-VSP	CAR-03600
CS -15552-VSP	CAR-05500

АРТЕРИАЛЬНЫЕ КАТЕТЕРЫ

№ По каталогу	Диаметр, Ga	Длина, см	Игла, Ga	Проводник, дюйм (мм) x см
Артериальные катетеры				
RA-04018	18	4,45	20	0,025"
RA-04020	20	4,45	22	0,018"
RA-04120	20	3,81	22	0,018"
RA-04122	22	3,49	23	0,015"
RA-04220	20	3,81	21	0,018"
RA-04220-W	20	3,81	21	0,018"
GH-04120	20	6,35	20	0,021" x 35
CH-04124	24	4,13	22	0,018" x 18
CH-04122	22	3,49	21	0,018" x 25

Артериальные катетеры, устанавливаемые по методу Сельдингера.				
SAC-00820	20	5	20	0,53 мм x 35 см
SAC-01218	18	12	18	0,64 мм x 45 см
SAC-00520	20	5	20	0,53 мм x 35 см
SAC-01222	22	12	22	0,53 мм x 50 см
SAC-01620	20	16	20	0,53 мм x 50 см
SAC-00522	22	5	22	0,53 мм x 35 см
SAC-00524	24	5	24	0,018" мм x 25 см
SAC-01220	20	12	20	0,53 мм x 50 см
SAC-00822	22	8	22	0,53 мм x 35 см



EZ-IO ВНУТРИКОСТНАЯ ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА



9058 ПРИВОД EZ-IO POWER DRIVER

Система EZ-IO внутрикостного доступа - современное решение проблемы сосудистого доступа в критических ситуациях и при сердечно-легочной реанимации

- Небольшое устройство на батарее с набором игл со скошенным острым концом
- Специально разработана для безопасного и контролируемого внутрикостного сосудистого доступа
- Разработан для пациентов всех возрастов и веса, доступно 3 размера иглы: для пациентов 3-39 кг, до 40 кг и более 40 кг.
- Предоставляет надежный и стабильный порт для доступа во внутрикостное пространство
- Жидкости и препараты достигают центрального кровотока за несколько секунд

Набор внутрикостных игл EZ-IO

№ по каталогу	Длина, мм	Игла, Ga	Кол-во	Вес пациента, кг
9018	15 мм x 1,8 мм	15G	5	3 - 39
9001	25 мм x 1,8 мм	15G	5	до 40
9079	45 мм x 1,8 мм	15G	5	40 и более

Набор внутрикостных игл EZ-IO + Фиксирующее устройство (Stabilizer)

№ по каталогу	Длина, мм	Игла, Ga	Кол-во	Вес пациента, кг
9018P	15 мм x 1,8 мм	15G	5	3 - 39
9001P	25 мм x 1,8 мм	15G	5	до 40
9079P	45 мм x 1,8 мм	15G	5	40 и более

9065 СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ИНСТРУМЕНТА



ДИЛАТАЦИОННЫЙ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКИЙ НАБОР

PercuTwist – новый стандарт в проведении дилатационной трахеостомии:
использование одного буца (PercuTwist) с винтовой резьбой

12 15 55

комплектуется трахеостомической канюлей PercuQuick кат. номер 12 15 50, как в наборе 12 15 49, I.D. 7/8/9 мм.
Кол-во 1.



Преимущества набора PercuTwist:

- Максимально безопасная манипуляция, благодаря использованию одного буца с винтовой резьбой.
- Минимальное давление на стенки трахеи, уменьшается риск повреждения задней стенки трахеи.
- Процедура «вкручивания» буца контролируется легче, чем введение сменных дилататоров.
- Покрытие буца PercuTwist обеспечивает максимальное скольжение по тканям.
- Преимущества набора PercuQuick.

наборы состоят:


1. PercuTwist буж.
2. Трахеостомическая канюля.
3. Буж безопасного проведения трахеостомической канюли по сформированному раневому каналу. Покрит гидрогелем.
4. Проводник с гибким j-образным гибким прямым кончиком.
5. Игла для проведения проводника.
6. Luer шприц.
7. Скальпель.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Необходим
эндоскопический контроль
безопасности выполнения
пункции, дилатации
и правильного положения
трахеоканюли.

КОНИОТОМИЧЕСКИЙ НАБОР TRACHEOQUICK



Шаг 1+2

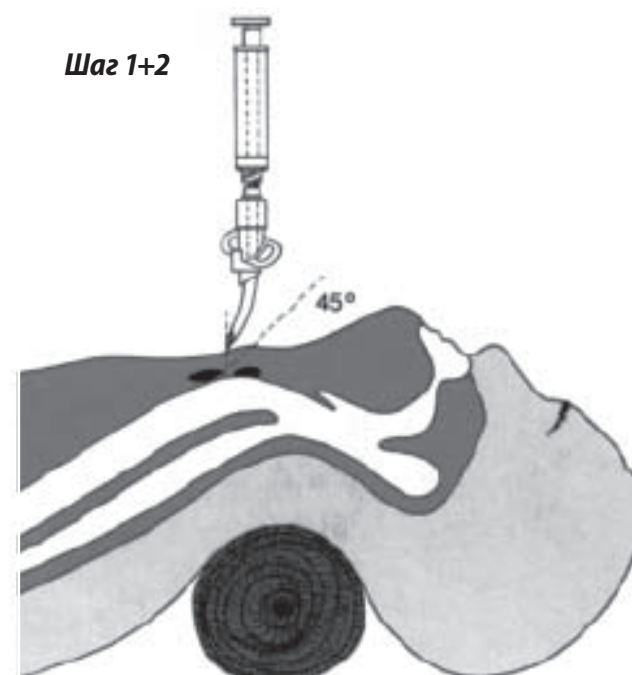

Шаг 3+4
снять стопор

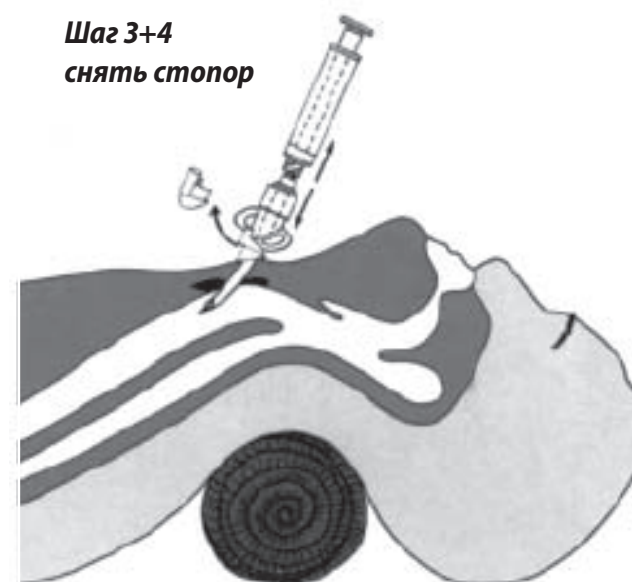

Шаг 5

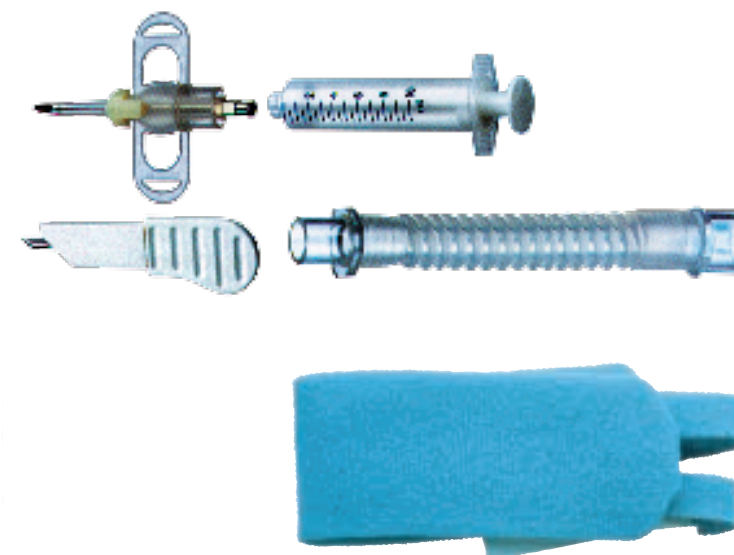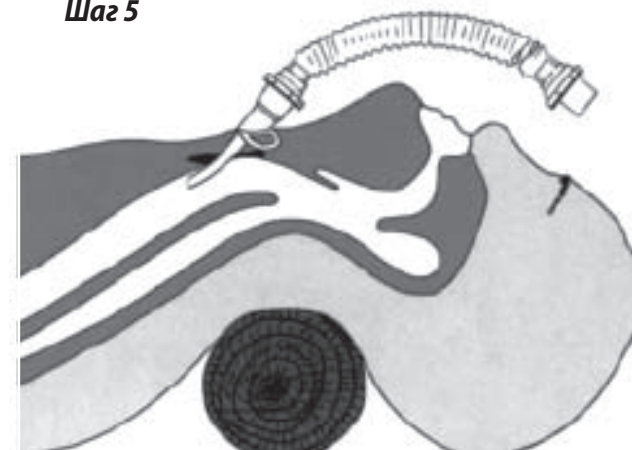

12 06 00

I.D. 2,0/4,0 мм. Кол-во 1

Реанимационный кониотомический набор TRACHEOQUICK:

- готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля (I.D. 2,0/4,0 мм, коннектор 15 мм O.D.) с фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали;
 - скальпель;
 - одноразовый шприц;
 - силиконовая соединительная трубка (посадочные кольца: I.D. 15,0 мм / O.D. 22,0 мм и 15,0 мм O.D.).
- Стерильно.



ACCUVEIN AV400

Единственное портативное, бесконтактное устройство для нахождения вен



- Облегчает процесс нахождения вен у пациента для венопункции
- Может использоваться для обнаружения клапанов и бифуркаций
- Облегченный, помещается в ладони
- Быстро преобразовывается из ручного в бесконтактный

ACCUVEIN AV400

“AccuVein снижает вероятность повторного укола на 50%!”
South Carolina Hospital Lab Manager

Характеристики

Вес	275 г
Размер	2" x 2.4" x 7.9" (5см x 6см x 20см)
Непрерывная работа	3 часа
Время заряда	2-5 часа
Батарея	Батарея AccuVein Ba400 литий-ионная 3.6В, 3,100мАч



ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. НЕ СМОТРЕТЬ НА ЛУЧИ.
Соответствует 21 CFR 1040.10 и 1040.11 кроме отклонений в соответствии с уведомлением о лазере № 50 от 24 июня 2007. Длина волны 642мм/785мм, Макс. Мощность 40мВ/25мВ, Энергия импульса 2.57мДж/1.58мДж, Длина импульса 900нс. IEC/EN60825-1(2001/07)

Аксессуары

Опция свободных рук.
Бесконтактное приспособление, освобождает ваши руки для выполнения прокола вены во время обзора сосудистой сети.



Техническая спецификация продукта

Лидер по нахождению вен

AccuVein – является мировым лидером в области оборудования по нахождению вен. AccuVein - это портативный определитель вен, получивший многочисленные награды и мировое признание. AccuVein предлагает единственный в своем роде тренинг по профессиональной подготовке медсестер. AccuVein разрабатывался по программе поддержки мирового уровня «Spare-in-the-Air», которая позволяет практикующим врачам получить быстрый доступ к венам.

Средство первой необходимости

AccuVein AV400 идентифицирует участок кожи с сосудистой системой, позволяя определить состояние сосуда, избегая клапанов или разветвлений, делая более эффективной процедуру прокола вены с наименьшим дискомфортом для пациента. Именно поэтому оборудование AccuVein было включено в международные стандарты лечения.

Система осмотра вен


В дополнение к устройству нахождения вен AccuVein, включена следующая комплектация:

- Интегрированная батарея
- Зарядная подставка, универсальный источник питания и адаптеры для разных типов розеток.

Особенности AV400

- **Удобный в использовании.** Нет необходимости калибровки или регулировки, всегда готов к немедленному применению. Устройство можно держать в любом направлении, работает на расстоянии 10 и более сантиметров от поверхности кожи.
- **Компактный размер.** AV400 помещается в руке и имеет вес менее 300 грамм.
- **Батарея.** Нет необходимости в замене батареи. Не требует подключения к электрической сети в процессе использования. Просто подключается к зарядному устройству.
- **Устойчивая визуализация.** Так как AV400 показывает вены в реальном времени, устройство может приспосабливаться к движениям пациента.
- **Режимы просмотра.** В дополнение к стандартной опции просмотра, AV400 имеет функцию inverse mode (эффект "негатива"), который позволяет улучшить видимость маленьких вен.
- **Точность.** Имеет функцию автоматической калибровки.
- **Типы пациентов.** Устройство для нахождения вен AccuVein предназначено для широкого круга пациентов, включая новорожденных, пациентов с темной кожей и склонных к ожирению.
- **Дизайн для медицинского оборудования.** Удобный дизайн AV400 не имеет отверстий и крышек, позволяет легко чистить устройство. Данное устройство может так же использоваться в "чистых помещениях" или в операционных.

www.accuvein.com

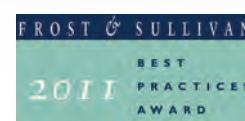

СИЛКОСПРЕЙ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ АЭРОЗОЛЬ

Универсальный силиконовый аэрозоль, применяемый для профилактики возможного сращения, образования налёта и корки в месте соприкосновения медицинских изделий из каучука, латекса, ПВХ со слизистой, а также смазки изделий для облегчения их введения. Лёгкость обработки изделия благодаря аэрозольной упаковке Силкоспрея. Одного флакона хватает на 1,5 – 2 месяца работы урологического отделения на 60 коек.

Жидкость для катетеров препятствует отложению солей на изделиях из резины, латекса и ПВХ, а как же защищает их от прилипания к слизистой оболочке. Применяемый пропеллент не содержит хлорфторуглеродов (ХФУ) и соответствует нормативным актам по защите окружающей среды.

Не применять для обработки изделий из SILKOMED (силикона)!



ЭНДОТЕСТ/МАНОМЕТР

Для раздувания манжеты и мониторинга давления в ней.

В комплекте с соединительной трубкой.

112270 Кол-во: 1 шт.



ДИАМЕТР КАТЕТЕРОВ

ДЮЙМ	MM	GAUGE	FRENCH
0,004	0,10	36	
0,005	0,13	35	
0,007	0,18	34	
0,008	0,20	33	
0,009	0,23	32	
0,010	0,25	31	
0,012	0,30	30	
0,013	0,33	29	1
0,014	0,36	28	
0,016	0,41	27	
0,018	0,46	26	
0,020	0,51	25	
0,022	0,56	24	
0,025	0,64	23	
0,026	0,66	–	2
0,028	0,71	22	
0,032	0,81	21	
0,035	0,89	20	
0,039	1,00	–	3
0,042	1,07	19	
0,050	1,27	18	
0,053	1,35	–	4
0,059	1,50	17	
0,065	1,65	16	
0,066	1,68	–	5
0,072	1,83	15	
0,079	2,00	–	6
0,083	2,11	14	
0,092	2,34	–	7
0,095	2,41	13	
0,105	2,67	–	8
0,109	2,77	12	
0,118	3,00	–	9
0,120	3,05	11	
0,131	3,33	–	10
0,134	3,40	10	
0,144	3,66	–	11
0,148	3,75	9	
0,158	4,00	–	12
0,165	4,19	8	
0,170	4,32	–	13
0,180	4,57	7	
0,184	4,67	–	14
0,195	4,95	–	
0,197	5,00	–	15
0,203	5,16	6	
0,210	5,33	–	16

MMG

Medical Marketing Group, LLC

5042 Yuma Lane N. | Plymouth, MN 55446 USA
p: +1.612.386.0298 | f: +1.651.305.7078

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Филиал «Medical Marketing Group L.L.C.»
Республика Казахстан, г. Алматы
ул.Луганского, 54В
tel.: +7 (727) 313 12 19
e-mail: info@medicalmarketinggrp.com
www.medicalmarketinggrp.com

Teleflex
medical