

Auriga XL™

Гольмиевый лазер 50 Ватт

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

Производительность и универсальность



MMG
Medical Marketing Group




StarMedTec является собственностью и не прямой дочерней компанией Boston Scientific

Auriga XL™

Гольмиевый лазер 50 Ватт

Auriga XL – это высокопроизводительный, универсальный гольмиевый лазер, созданный для использования во многих урологических процедурах. Высокая выходная мощность лазера и сбалансированные параметры подходят как для литотрипсии, так и для лечения ДГПЖ.

Универсальность

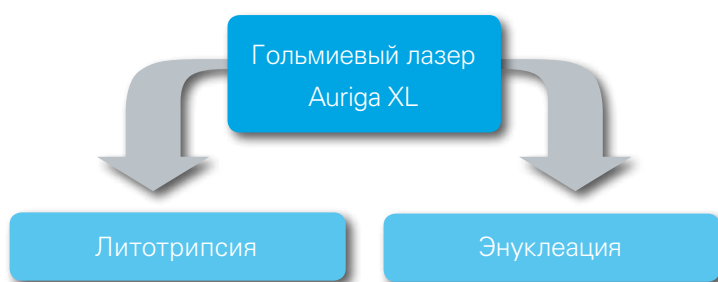

Гольмиевый лазер подходит
как для лечения ДГПЖ, так и МКБ

- Литотрипсия:
 - Литотрипсия камней, находящихся в почке, мочеточнике или мочевом пузыре
 - Техника «Stone Dusting»
- ДГПЖ
 - HoLEP
 - Трансуретральная инцизия простаты (TUIP)
 - Инцизия шейки мочевого пузыря (BNI)
- Мочеточниковые и уретральные стриктуры
- Абляция и резекция опухолей мочевого пузыря, мочеточниковых или уретральных стриктур
- Кондиломы




Мощность

- Высокая выходная мощность – 50 Ватт
- Максимальная частота – 50 Герц
- Максимальная энергия импульса – 4200 миллиджоулей
- Высокая выходная мощность импульса для литотрипсии
- Три режима с различными предустановленными параметрами работы:
 - Режим литотрипсии: короткий промежуток между импульсами
 - Режим абляции: средний промежуток между импульсами
 - Режим коагуляции: длительный промежуток между импульсами

Интеллектуальное распознавание фиброволокна

- Лазер Auriga XL работает с фиброволокнами LightTrail™, включая волокно LightTrail™ 270 µm, способное работать на частоте 18 Герц.
- Консоль распознает тип и размер волокна
- Точное оптическое соединение фиброволокна и консоли позволяет снизить потерю мощности и предотвратить поломку фиброволокна
- Консоль позволяет выбрать только те настройки, которые могут быть предназначены для вставленного фиброволокна

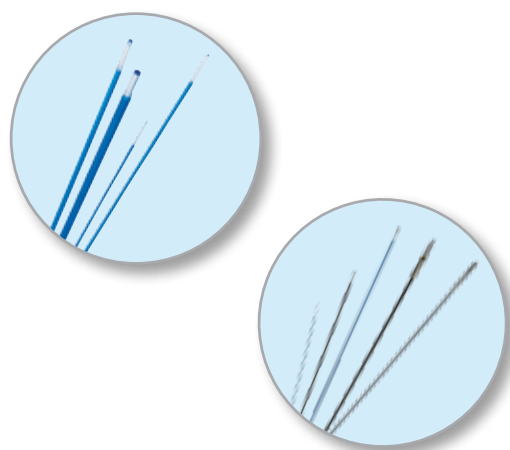

Функциональный дизайн

- Мобильная консоль, не занимающая много места
- Регулируемая яркость пилотного луча


Простое в использовании программное обеспечение

- Тачскрин с интуитивно понятным меню
- Изображения на кнопках меню, позволяющие легко ориентироваться



Гольмиевый специалист – разнообразные сферы применения

Несмотря на то что лазер Auriga XL был создан для урологических процедур, она также используется и в других специальностях, включая гастроэнтерологию, ЛОР, гинекологию, артроскопию, общую хирургию и пульмонологию

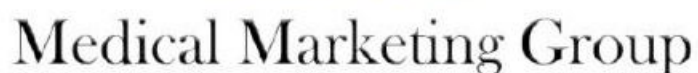

Адрес: г. Алматы ул. Луганского 54 В
Телефон +7 (727) 313 12 19

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

Произведено

StarMedTec GmbH
Kreuzstraße 22 | 82319 Starnberg
Германия

Ordering Information

+ 49 (0) 8151 / 268 61-0
info@starmedtec.com
www.starmedtec.com

© 2015 Boston Scientific Corporation
или дочерние компании.
Все права соблюдены
URQ-255601-AB SEP/2015



Все указанные торговые марки принадлежат соответствующим собственникам.

ВНИМАНИЕ: закон ограничивает продажу данных устройств врачами или по их заказу. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции пользователей указаны на маркировке каждого изделия.

Информация приведена для использования только в странах,
где осуществлена регистрация продукции органами здравоохранения.