

ЦВК ДЛЯ ГЕМОДИАЛИЗА

Наборы с катетерами для диализа ARROW имеют различную комплектацию и ряд особенностей.

Простейшие наборы серии CV отличаются минимальной стоимостью и содержат необходимый минимум принадлежностей для введения катетера по методу Сельдингера.


В наборах серии CS имеется пластиковый катетер на игле для безопасного введения проводника, в ряде наборов – шприц Arrow® Raulerson.

В некоторых наборах катетер имеет более удобные для пациента изогнутые удлинительные линии, обращенные разъемами книзу, для установки в яремную вену. Эти катетеры имеют маркировку UF.

Особенного внимания заслуживают катетеры с антимикробным покрытием ARROW g^{ard} Blue®. Их можно рекомендовать для применения, в том числе длительного, у пациентов с высоким риском развития инфекции. Катетеры с антимикробным покрытием при соблюдении стандартных процедур по уходу реже становятся причиной инфекции и не требуют частой замены.

№ По каталогу	Диаметр, Fr	Длина, см	Сечение, Просветы, Ga	Линии	Шприц	Игла, Ga x см	Проводник, дюйм x см
---------------	-------------	-----------	-----------------------	-------	-------	---------------	----------------------


Двухпросветные

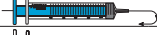CS-12122-E	12	16	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-12122-F	12	16	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-15122-E	12	20	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CS-15122-F	12	20	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CV-12122-F	12	16	C 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CV-12122-UF	12	16	C 12/12	Φ		18 x 6,35	0,035" x 68
CV-12142-UF	14	15	C 10/10	Φ		18 x 6,35	0,035" x 60
CV-13122-UF	12	13	C 12/12	Φ		18 x 6,35	0,035" x 60
CV-15122-F	12	20	B 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CV-15122-UF	12	20	B 12/12	Φ		18 x 6,35	0,035" x 60
CV-15142-UF	14	20	C 10/10	Φ		18 x 6,35	0,035" x 68
CD-10802	8	11	D 14/14	Y		20 x 3,81	0,025" x 45
CD-13902	9	13	D 14/14	Y		20 x 3,81	0,025" x 60

Трехпросветные


CS-12123-E	12	16	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-12123-F	12	16	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-15123-E	12	20	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CS-15123-F	12	20	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CS-16123-F	12	25	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68

Двухпросветные ЦВК ARROW g^{ard} Blue® с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag⁺

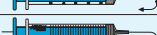CS-22122-F	12	16	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-25122-F	12	20	A 12/12	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CU-22122-F	12	16	A 12/12	Φ		18 x 6,35	0,035" x 60
CU-23122-F	12	13	A 12/12	Φ		18 x 6,35	0,035" x 60
CU-25122-F	12	20	A 12/12	Φ		18 x 6,35	0,035" x 60

Трехпросветные ЦВК ARROW g^{ard} Blue® с антимикробным покрытием хлоргексидином/сульфадиазином Ag⁺


CS-22123-F	12	16	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 60
CS-25123-E	12	20	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68
CS-25123-F	12	20	F 12/12/16	Y		18 x 6,35	0,035" x 68

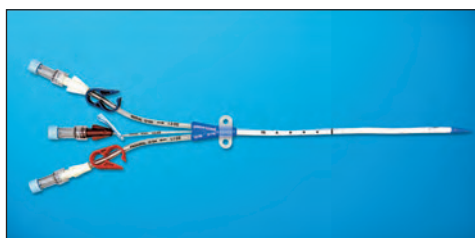

ПОСТОЯННЫЙ КАТЕТЕР РЕТРОГРАДНОГО ТУННЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОДИАЛИЗА CANNON II PLUS

Технология ретроградного туннелирования, реализованная в катетерах для хронического гемодиализа ARROW – CANNON II Plus, обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной антеградной методикой установки:

- Ретроградное туннелирование позволяет правильно установить кончик катетера до создания подкожного туннеля.
- Техника установки не требует надвигать кончики через подкожный канал перед введением в вену, что снижает вероятность инфицирования.
- Расщепленный V-образный кончик катетера минимизирует риск окклюзии и снижает рециркуляцию диализированной крови менее 5%.
- Сменный блок портов позволяет сохранить сосудистый доступ при повреждении внешней части катетера и продлить время его функционирования.

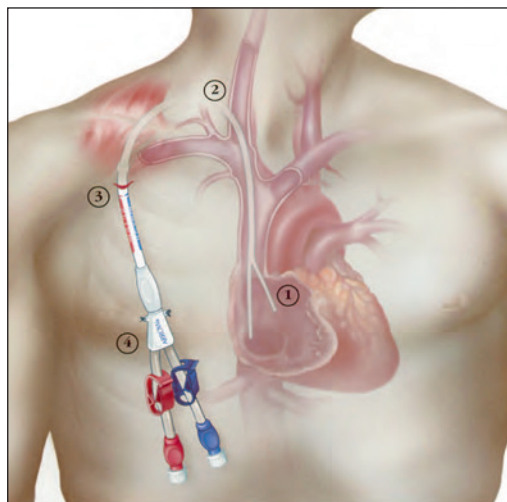

Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расщепленным окончанием 15 Fr. 10/10 Ga, пункционная игла 18 Ga x 6,35 см, проводник, скальпель, тканевые расширители: 12 Fr и 14 Fr, разрывной интродьюсер 16 Fr, расширитель туннельного хода, металлический проводник катетера по туннелю, зажим катетера, подсоединяемый сменный блок с портами, инъекционные колпачки, колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов, фиксирующая прозрачная наклейка Tegaderm® 10,0 см x 12,0 см.

№ По каталогу	Диаметр, Fr	Длина, см	Расширитель, Ga	Линии	Интродьюсер, Fr	Игла, Ga x см	Проводник, дюйм x см
CS-15242-VSP	15	24	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100
CS-15282-VSP	15	28	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100
CS-15322-VSP	15	32	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100
CS-15362-VSP	15	36	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100
CS-15552-VSP	15	55	12/14	Y	16	18 x 3,81	0,038" x 100

Компания ARROW рекомендует устанавливать катетеры CANNON согласно приведенной ниже таблице:

Каталожный №	Длина катетера	Место установки
CS -15242-VSP	24 см	Правая внутренняя яремная вена
CS -15282-VSP	28 см	Правая внутренняя яремная вена
CS -15322-VSP	32 см	Левая внутренняя яремная вена
CS -15362-VSP	36 см	Левая внутренняя яремная вена, бедренная вена
CS -15552-VSP	55 см	Бедренная вена

При повреждении, в результате длительного использования, элементов съемного блока с портами, он может быть заменен на аналогичный без удаления катетера:

Каталожный № катетера	Каталожный № набора для замены портов катетера
CS -15242-VSP	CAR-02400
CS -15282-VSP	CAR-02800
CS -15322-VSP	CAR-03200
CS -15362-VSP	CAR-03600
CS -15552-VSP	CAR-05500