



СИСТЕМА КЛИПИРОВАНИЯ WESK HORIZON

Имя, которое вы знаете; продукт, которому вы доверяете





КАРТИРДЖ

ПРОСТАЯ ЗАГРУЗКА С КЛЕЯЩИМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

- Зажимный картридж Horizon может обеспечить простую и точную загрузку, способную эффективно улучшить хирургическую процедуру.
- Боковые пружины, удерживающие зажим, в картридже Horizon во время загрузки зажима сменяются челюстями для нанесения.
- Устранение пружин освобождает зажим для почти не создающей трения загрузки из картриджа одной рукой.
- Зажимы размещены в гнездах картриджей по центру для точности загрузки.
- Зажимные картриджи обладают цветовыми обозначениями, соответствующими устройствам для нанесения.
- Доступны картриджи с 6 и 14 зажимами.
- Особая клеящая основа картриджа Horizon позволяет пользователю с удобством изменить место загрузки зажима: картриджи прикрепляются к любому стерильному участку.



УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ

- Устройство для эндоскопического нанесения Horizon обеспечивает смыкание зажимов, предназначенное для обеспечения врачам крепкой тактильной обратной связи.
- Большой, легкий поворотный регулятор дает возможность вращать ручку устройства для нанесения в диапазоне 360° одним пальцем.
- Устройства для эндоскопического нанесения Horizon доступны для средних, средне-крупных и крупных зажимов Horizon и снабжены портами для промывания для тщательной очистки.
- Многоразовые устройства для нанесения специально предназначены для использования с зажимами для клипирования Horizon и обеспечивают огромную экономию средств по сравнению с одноразовыми автоматическими устройствами для нанесения зажимов.
- Все открытые хирургические устройства для нанесения Horizon, предназначенные для работы одной рукой, открываются на замке контейнера для легкой и тщательной очистки.
- Открытые хирургические устройства для нанесения доступны с наклонными, изогнутыми или прямоугольными челюстями.

СИСТЕМА HORIZON: РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАШИХ НУЖД

Horizon разработана для нужд хирургов, медсестер и прочего персонала, работающего в операционных.



ЗАЖИМ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

- Шевронообразная форма зажима Horizon охватывает ткань с точным смыканием от кончика к кончику.
- Сердцевидная проволока предназначена для усиления захвата сосудов каждым зажимом.
- Поперечные бороздки не дают зажиму скользить по сосуду.
- Размер внутренней бороздки зажима Horizon рассчитан на ослабление режущего воздействия зажима.
- Треугольное поперечное сечение ножки зажима Horizon обеспечивает максимальное соприкосновение поверхностей зажима и челюсти устройства для нанесения, практически исключая выпадение зажима.

□ Микро

■ Малый

■ Малый/
Широкий

■ Средний

■ Средний/Крупный

■ Крупный

ЗАЖИМЫ ДЛЯ КЛИПИРОВАНИЯ

ТИТАНОВЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ КЛИПИРОВАНИЯ				WECK
№	РАЗМЕР ЗАЖИМА	ЗАЖИМЫ/КАРТРИДЖ	КАРТРИДЖИ/КОНТЕЙНЕР	ЗАЖИМЫ/КОНТЕЙНЕР
005200	○ microclip	6	30	180
001200	● малый	6	30	180
001204	● малый	24	25	600
001201	● малый широкий	6	30	180
001205	● малый широкий	24	25	600
002200	● средний	6	30	180
002204	● средний	24	25	600
003200	● средне-крупный	6	20	120
003204	● средне-крупный	24	15	360
004200	● крупный	6	20	120
004204	● крупный	24	15	360

ОТКРЫТЫЕ ОПЕРАЦИИ

ТИТАНОВЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ КЛИПИРОВАНИЯ			WECK
№	РАЗМЕР ЗАЖИМА	РАБОЧАЯ ДЛИНА	КОЛ-ВО
20° изогнутые			
537061	○ microclip	6" (15 см)	1
537081	○ microclip	8" (20 см)	1
137061	● малый	6" (15 см)	1
137081	● малый	8" (20 см)	1
137111	● малый	11" (28 см)	1
137062	● малый широкий	6" (15 см)	1
137082	● малый широкий	8" (20 см)	1
137112	● малый широкий	11" (28 см)	1
237061	● средний	6" (15 см)	1
237081	● средний	8" (20 см)	1
237111	● средний	11" (28 см)	1
337081	● средне-крупный	8" (20 см)	1
337111	● средне-крупный	11" (28 см)	1
437081	● крупный	8" (20 см)	1
437111	● крупный	11" (28 см)	1
55° угловые			
137085	● малый	8" (20 см)	1
137086	● малый широкий	8" (20 см)	1
237085	● средний	8" (20 см)	1
237115	● средний	11" (28 см)	1
337085	● средне-крупный	8" (20 см)	1
337115	● средне-крупный	11" (28 см)	1
437085	● крупный	8" (20 см)	1
437115	● крупный	11" (28 см)	1
70° угловые			
237117	● средний	11" (28 см)	1
337117	● средне-крупный	11" (28 см)	1
437117	● крупный	11" (28 см)	1

Все зажимы для клипирования Horizol™ упаковываются в стерильном виде. Системы зажимов для клипирования отличаются характеристиками смыкания зажимов. Пользователь обязан проверить безопасность зажимов для сосудов или иной ткани.

MICROCLIP™



Самый новый член семейства Horizon. Для безопасного клипирования малых сосудов или структур.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МНОГОУГЛОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ




28-сантиметровое наносящее устройство многоугольного доступа Horizon для малых (с широкими гнездами) зажимных картриджей снабжено угловой челюстью (угол 45°) или изогнутой челюстью для оптимального угла доступа к цели операции.

ЗАЖИМ: ВИД В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ



С правильно (вверху) и неправильно (внизу) расположенными челюстями устройства для нанесения.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ РАЗБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЗАЖИМОВ

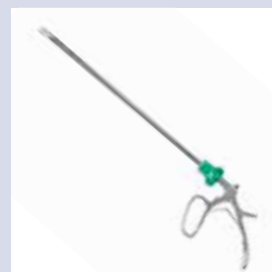

Наши устройства для нанесения ТАР можно разбирать для облегчения очистки. Они снабжены поворотным регулятором на 360° для улучшения доступа и видимости.

ОТКРЫТЫЕ ОПЕРАЦИИ

КЛИПИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ, ОСОБЫЕ

WECK

№	РАЗМЕР ЗАЖИМА	КОНСТРУКЦИЯ	РАБОЧАЯ ДЛИНА	КОЛ-ВО
20° изогнутые		УСТРОЙСТВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ		
137118	● малый широкий	многоугольная	11" (28 см)	1
45° angled				
137117	● малый широкий	многоугольная	11" (28 см)	1

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

РАЗБОРНЫЕ КЛИПИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

WECK

№	РАЗМЕР ЗАЖИМА	ДИАМЕТР УСТР. ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	ДИАМЕТР ТРОАКАРА	РАБОЧАЯ ДЛИНА	КОЛ-ВО
238110T	● средний	10 мм	10 мм	13" (33 см)	1
338110T	● средне-крупный	10 мм	10 мм	13" (33 см)	1

НЕРАЗБОРНЫЕ КЛИПИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

WECK

№	РАЗМЕР ЗАЖИМА	ДИАМЕТР УСТР. ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	ДИАМЕТР ТРОАКАРА	РАБОЧАЯ ДЛИНА	КОЛ-ВО
438110	● крупный	12 мм	12 мм	11" (28 см)	1

НЕРАЗБОРНЫЕ КЛИПИРУЮЩИЕ ЗАЖИМЫ, ПОДКОЖНЫЕ

WECK

		ДИАМЕТР УСТР. ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	ДИАМЕТР ТРОАКАРА	РАБОЧАЯ ДЛИНА	КОЛ-ВО
238200	● средний	5 мм ручка, 7 мм челюсть	8 мм	13" (32 см)	1

Teleflex – ведущий мировой поставщик специальных медицинских устройств, используемых для диагностических и терапевтических процедур в интенсивной терапии, урологии и хирургии. Наша задача – предоставлять решения, дающие медицинским работникам возможность улучшать результаты и повышать безопасность пациента и медработника. Мы специализируемся на устройствах для общей и местной анестезии, кардиологической помощи, искусственной вентиляции легких, урологии, сосудистого доступа и хирургии и обслуживаем медицинских работников более, чем в 130 странах. Teleflex также предлагает специальные товары для производителей медицинских устройств.

Среди наших известных брендов ARROW®, DEKNATEL®, GIBECK®, HUDSON RCI®, KMEDIC®, PILLING®, PLEUR-EVAC®, RÜSCH®, SHERIDAN®, TAUT®, TFX OEM®, VASONOVA™ и WECK®, все из которых являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Teleflex Incorporated.

География деятельности Teleflex на международном рынке: Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Чешская Республика, Франция, Германия, Греция, Индия, Ирландия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, Южная Африка, Испания, Швейцария, Соединенное Королевство, Уругвай и США.

НАШИ КОНТАКТЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ И В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

“Medical Marketing Group L.L.C.”
5042 Yuma Lane N. Plymouth, MN 55446 USA
P: + 1 612 386 0298 F: + 1 651 305 7078
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Филиал “Medical Marketing Group L.L.C.”
Республика Казахстан, г. Алматы
ул.Луганского, 54В
Тел: + 7 (727) 313-12-19
E-mail: info@medicalmarketinggrp.com
www.medicalmarketinggrp.com