


TUBE

| Malleable Penile Prosthesis |

Усовершенствованный
дизайн для
максимальной
производительности,
когда важна уверенность
в себе



Promedon
— People + Innovation

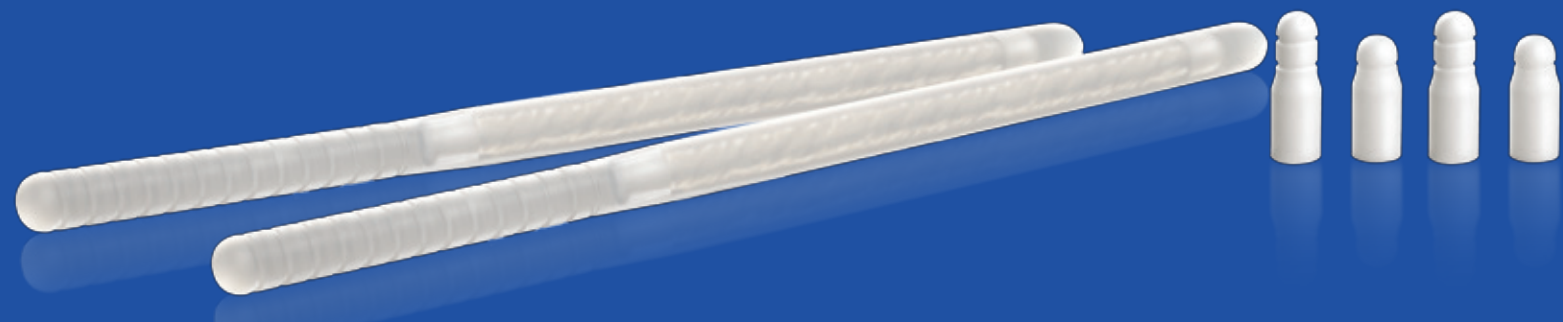

TUBE


Malleable Penile Prosthesis

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Уникальный дизайн продукта обеспечивает осевую жесткость и производительность, когда они важны.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Сердечник из серебряной витой проволоки обеспечивает осевую жесткость и пластичность.
- Покрытие из ПТФЭ вокруг серебряной сердцевины гарантирует надежность имплантата.
- Коническая внешняя оболочка из биосовместимого силиконового эластомера.
- Отдельные рентгеноконтрастные силиконовые удлинители для задней части наконечника для индивидуальной настройки длины протеза.

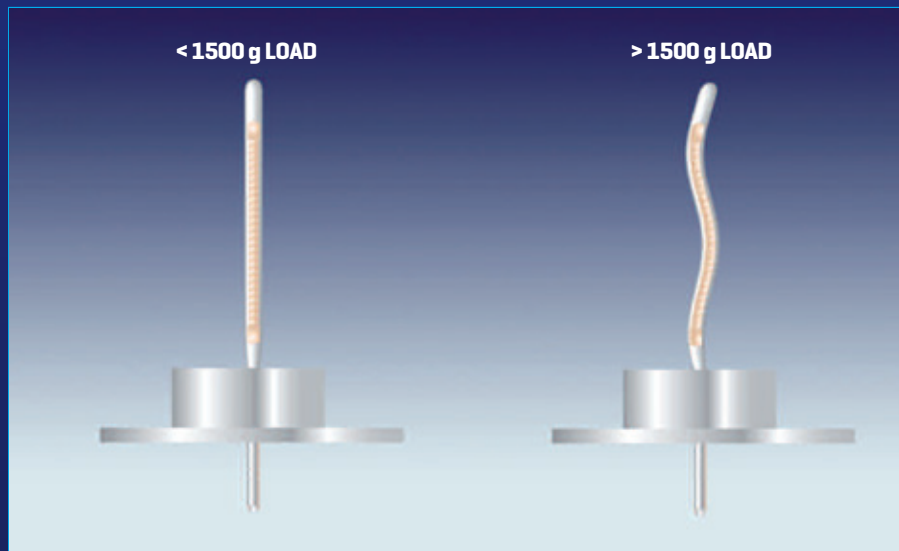

Осевая ригидность полового члена влияет на удовлетворенность пациента и партнера после имплантации протеза полового члена
Абдулла Аль Ансари, Райд А. Талиб, Ондер Кангунен, Ахмад Шамсодини - DOI: 10.4081 / aiaa.2013.3.138
«Настоящее исследование было разработано с целью оценки осевой жесткости в сочетании с удовлетворенностью пациентов и партнеров». . . «Согласно нашим результатам, осевая жесткость, которая составляет около 1000 г. by DIR, необходимо для удовлетворения пациентов, которым имплантирован PP ».
Трубка с минимальной нагрузкой 1500 г для сгибания одного стержня обеспечивает исключительные характеристики.

ПРЕВОСХОДНАЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ

Структура серебро-ПТФЭ-силикон придает ТРУБКЕ уникальную податливость, позволяющую пациенту устанавливать имплантат под углом до 130 °.

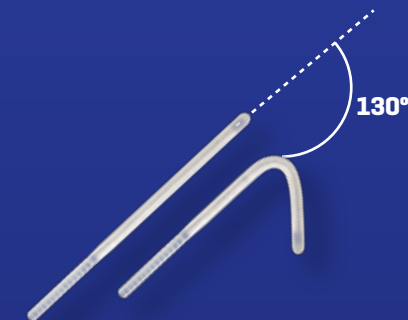


БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Процесс производства TUBE Malleable Penile Prosthesis гарантирует правильную твердость для каждого сегмента имплантата.

Мягкий дистальный конец сводит к минимуму риск раздражения и эрозии. Более жесткий проксимальный конец значительно увеличивает стабильность и фиксацию.

Наружная поверхность силиконового корпуса предназначена для предотвращения вращения.

СИЛИКОНОВАЯ ТВЕРДОСТЬ

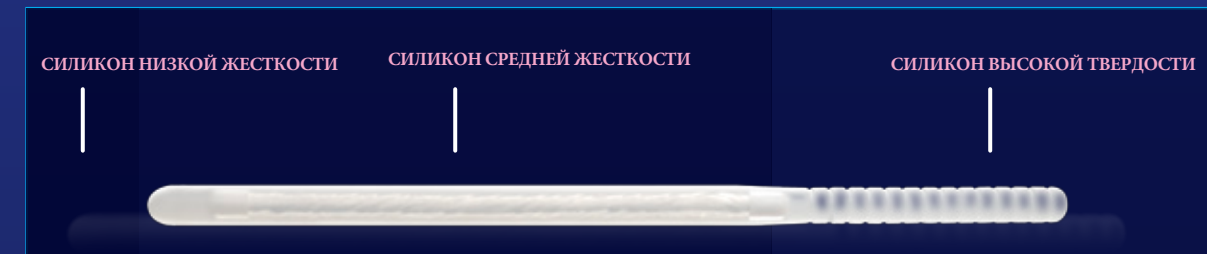

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОЙ ДЛИНЫ

Для достижения высоких эксплуатационных характеристик и долговечных результатов очень важно правильно выбрать длину протеза.

Проксимальная часть предназначена для обрезки и удобной настройки длины протеза в соответствии с измерением общей длины корпуса. Чтобы выбрать правильную длину протеза для каждого отдельного пациента, обязательно следуйте инструкциям по хирургической технике TUBE Malleable Penile Prosthesis.

Рентгеноконтрастные удлинители заднего кончика прикрепляются к проксимальному концу имплантата для точной регулировки конечной длины имплантата и, кроме того, для придания округлой формы для мягкого контакта с анатомией проксимальных кавернозных тел.



TUBE

| Malleable Penile Prosthesis |



Код продукта	A (mm)	B (mm)	C (mm)
T-090	65	135	9
T-100	65	155	10
T-110	70	170	11
T-120	80	180	12
T-120VS	60	155	12
T-130	80	187	13
T-130VS	80	172	13

Tube содержит:

2 гемипротеза

2 задних наконечника 10 мм

2 задних наконечника 15 мм

В-10-01 [05] / 10-MAR-2017

CE 0197

MMG

Medical Marketing Group

Адрес: г. Алматы ул. Луганского 54 В
Телефон +7 (727) 313 12 19

Promedon

— People + Innovation
www.promedon.com