

Polaris™ Ultra

Двойной мочеточниковый стент по дюрометру с материалом Percuflex® и покрытием HydroPlus™

Инвормация для заказа

French				.038” Жесткий шaft PTFE	.038” Glidewire®	.035” Жесткий шaft Glidewire
Размер x Длина				Прямой 3см	Прямой 3см	Прямой 3см
Между косичками				Гибкий наконечник	Гибкий наконечник	Гибкий наконечник
5	x	10	M0061921110	M006192111010	M006192111020	M006192111030
5	x	12	M0061921120	M006192112010	M006192112020	M006192112030
5	x	14	M0061921130	M006192113010	M006192113020	M006192113030
5	x	16	M0061921140	M006192114010	M006192114020	M006192114030
5	x	18	M0061921150	M006192115010	M006192115020	M006192115030
5	x	20	M0061921200	M006192120010	M006192120020	M006192120030
5	x	22	M0061921210	M006192121010	M006192121020	M006192121030
5	x	24	M0061921220	M006192122010	M006192122020	M006192122030
5	x	26	M0061921230	M006192123010	M006192123020	M006192123030
5	x	28	M0061921240	M006192124010	M006192124020	M006192124030
5	x	30	M0061921250	M006192125010	M006192125020	M006192125030
6	x	20	M0061921300	M006192130010	M006192130020	M006192130030
6	x	22	M0061921310	M006192131010	M006192131020	M006192131030
6	x	24	M0061921320	M006192132010	M006192132020	M006192132030
6	x	26	M0061921330	M006192133010	M006192133020	M006192133030
6	x	28	M0061921340	M006192134010	M006192134020	M006192134030
6	x	30	M0061921350	M006192135010	M006192135020	M006192135030
7	x	20	M0061921400	M006192140010	M006192140020	M006192140030
7	x	22	M0061921410	M006192141010	M006192141020	M006192141030
7	x	24	M0061921420	M006192142010	M006192142020	M006192142030
7	x	26	M0061921430	M006192143010	M006192143020	M006192143030
7	x	28	M0061921440	M006192144010	M006192144020	M006192144030
7	x	30	M0061921450	M006192145010	M006192145020	M006192145030
8	x	20	M0061921500	M006192150010	M006192150020	M006192150030
8	x	22	M0061921510	M006192151010	M006192151020	M006192151030
8	x	24	M0061921520	M006192152010	M006192152020	M006192152030
8	x	26	M0061921530	M006192153010	M006192153020	M006192153030
8	x	28	M0061921540	M006192154010	M006192154020	M006192154030
8	x	30	M0061921550	M006192155010	M006192155020	M006192155030

French			.035” Проводник	.035 ” Жесткий вал PTFE	.035” Sensor®	.038” Sensor
Размер x Длина			Прямой 3см	Прямой 3см	PTFE-Nitinol	PTFE-Nitinol
Между косичками			Гибкий наконечник	Гибкий наконечник	Dual-Flex	Dual-Flex
5	x	10	M006192111040	M00619211101050	M006192111090	M006192111120
5	x	12	M006192112040	M00619211201050	M006192112090	M006192112120
5	x	14	M006192113040	M00619211301050	M006192113090	M006192113120
5	x	16	M006190114040	M00619211401050	M006192114090	M006192114120
5	x	18	M006192115040	M00619211501050	M006192115090	M006192115120
5	x	20	M006192120040	M00619212001050	M006192120090	M006192120120
5	x	22	M006192121040	M00619212101050	M006192121090	M006192121120
5	x	24	M006192122040	M00619212201050	M006192122090	M006192122120
5	x	26	M006192123040	M00619212301050	M006192123090	M006192123120
5	x	28	M006192124040	M00619212401050	M006192124090	M006192124120
5	x	30	M006192125040	M00619212501050	M006192125090	M006192125120
6	x	20	M006192130040	M00619213001050	M006192130090	M006192130120
6	x	22	M006192131040	M00619213101050	M006192131090	M006192131120
6	x	24	M006192132040	M00619213201050	M006192132090	M006192132120
6	x	26	M006192133040	M00619213301050	M006192133090	M006192133120
6	x	28	M006192134040	M00619213401050	M006192134090	M006192134120
6	x	30	M006192135040	M00619213501050	M006192135090	M006192135120
7	x	20	M006192140040	M00619214001050	M006192140090	M006192140120
7	x	22	M006192141040	M00619214101050	M006192141090	M006192141120
7	x	24	M006192142040	M00619214201050	M006192142090	M006192142120
7	x	26	M006192143040	M00619214301050	M006192143090	M006192143120
7	x	28	M006192144040	M00619214401050	M006192144090	M006192144120
7	x	30	M006192145040	M00619214501050	M006192145090	M006192145120
8	x	20	M006192150040	M00619215001050	M006192150090	M006192150120
8	x	22	M006192151040	M00619215101050	M006192151090	M006192151120
8	x	24	M006192152040	M00619215201050	M006192152090	M006192152120
8	x	26	M006192153040	M00619215301050	M006192153090	M006192153120
8	x	28	M006192154040	M00619215401050	M006192154090	M006192154120
8	x	30	M006192155040	M00619215501050	M006192155090	M006192155120

Soft-Flex является товарным знаком Vance Products Incorporated.
Glidewire - торговая марка Terumo Corporation.
Полные инструкции по применению, включая показания к применению, противопоказания, возможные осложнения, предупреждения и предостережения, см. В листке-вкладыше, прилагаемом к стенту Polaris Ultra Stent. Внимание! Федеральный закон (США) разрешает продажу этого устройства только врачам или по их указанию.

Polaris™ Ultra

Двойной мочеточниковый стент по дюрометру с материалом Percuflex® и покрытием HydroPlus™



Мягкая установка



Delivering what’s next.™

Boston Scientific Corporation
One Boston Scientific Place
Natick, MA 01760-1537
www.bostonscientific.com/urology

Ordering Information
1.888.272.1001

© 2004 Boston Scientific Corporation
or its affiliates. All rights reserved.

BVU2230 7.5M 12/04-12/06



Адрес: г. Алматы ул. Луганского 54 В
Телефон +7 (727) 313 12 19

Polaris™ Ultra

Двойной мочеточниковый стент по дюрOMETру с материалом Percuflex® и покрытием HydroPlus

Стент Polaris Ultra Ureteral Stent разработан для обеспечения преимуществ легкости установки твердого стента, преобразованного в мягкую спираль мочевого пузыря. Запатентованная технология совместной экструзии стента Polaris Ultra объединяет в одном стенте твердомер Percuflex Plus и мягкий материал твердомера Percuflex. Стент Polaris Ultra также имеет катушку мочевого пузыря Nautilus™, предназначенную для снижения раздражения мочевого пузыря, и расслабленную почечную спираль (по сравнению со стентом Polaris), предназначенную для облегчения удаления.



Покрытие HydroPlus
для облегчения продвижения

Отметки об
окончании,
подтверждающие
продвижение

Новая
Почечная спираль

Размер и название
компании отпечатаны
для улучшения
идентификации во время
замены стента

ВОВЫЙ
МОЧЕВОЙ
ПУЗЫРЬ
NAUTILUS

Материал Percuflex с конструкцией покрытия HydroPlus

биосовместимый материал, рассчитанный на 365 дней пребывания *

* Данные из архива Boston Scientific Corporation.

Конический наконечник

Разработан, чтобы облегчить доступ через отверстие мочеточника

Запатентованная
коэкструзия
обеспечивает плавный
переход от твердого
стента к мягкому по
твердомеру



Сварка

Нахлесточный шов



СО-ЭКСТРУЗИЯ




Разработан для оптимального дренажа

Низкий профиль и большой внутренний просвет достижима благодаря столбчатой прочности и структурной целостности материала Percuflex

Версия 5Fr

разработана для максимального увеличения потока мочи и может проходить по проводнику 0,038 дюйма

ПОПЕРЕЧНЫЙ ВИД СТЕНТА 6Fr и 5Fr

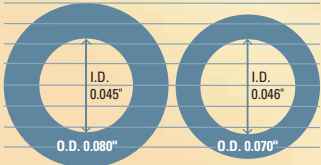

COOK SOF-FLEX™ STENT POLARIS ULTRA STENT


МАТЕРИАЛ

Материал Percuflex - это запатентованный сополимер с рентгеноконтрастным наполнителем, разработанный специально для изготовления мочеточниковых стентов. Стенты, изготовленные из материала Percuflex, доступны в твердом, мягком и двойном твердомерах для решения проблем длительного стентирования мочеточника. Стенты, изготовленные из материала Percuflex, имеют мягкую, гладкую и гибкую поверхность и покрытие HydroPlus, которое обеспечивает идеальный интерфейс между стентом и эпителиальным слоем мочеточника. Кроме того, инертные свойства материала Percuflex обеспечивают подтвержденную биосовместимость в течение 365 дней *.


ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕНТОВ



Percuflex с покрытием
HydroPlus

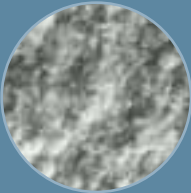

Полиуретан
(без покрытия)

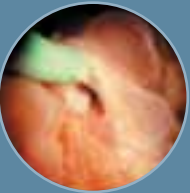

Постоянный
полиуретановый
стент

«Разрушение эпителия имеет большое значение для биосовместимости стентов, поскольку серьезное повреждение эпителия может привести к фиброзу стенки мочеточника и возможному образованию стриктуры».

Cormio, L.; Ureteric Injuries, Clinical and Experimental Studies., Scandinavian Journal of Urology and Nephrology., Supp. 171., 1995.

«Количество стентов было небольшим, но результаты были однозначными: стенты Hydro-Plus (и силиконовые) оказались более безопасными, чем другие, поскольку они вызывали меньшее поверхностное разрушение эпителия и реакцию хозяина».